



Dental Implant System
牙种植体系统

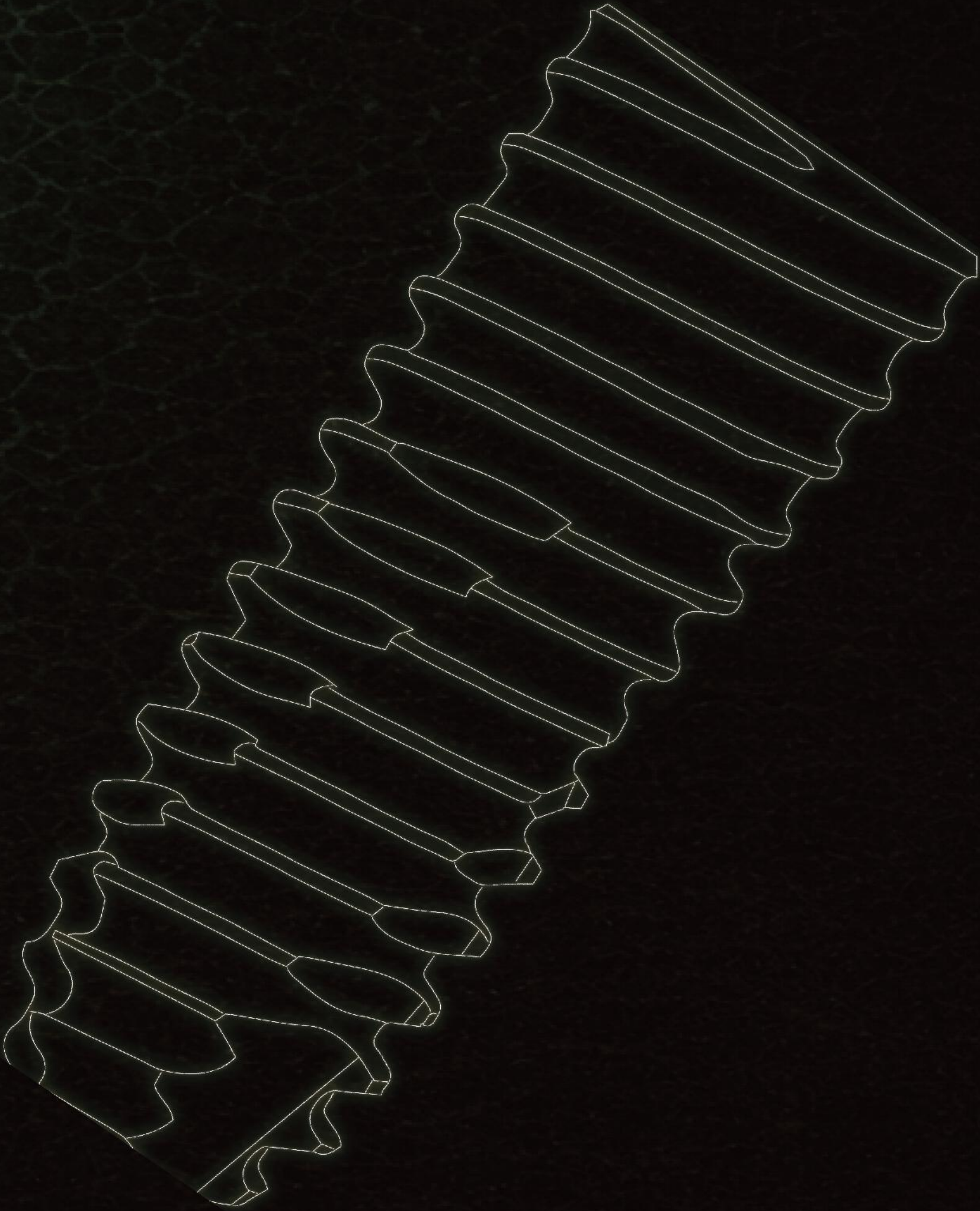

艾科邦
— EcoBon —

安特医疗集团旗下植体品牌

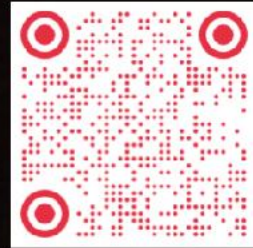



让医生种好牙 让患者有好牙

集团介绍

深圳安特医疗股份有限公司成立于2000年，是一家致力于高科技医疗器械研发、生产、销售与服务的专业厂家。主要业务涵盖医学影像、心血管及外周微创介入、口腔医学、麻醉与重症监护等领域。

自创立以来，安特医疗始终坚持创新驱动与质量为先的发展理念，在医疗器械领域持续深耕，展现出卓越的综合实力与发展韧性。公司已连续十五年被评为国家高新技术企业，并连续十年被广东省药品监督管理局评定为A类医疗器械生产企业。2023年，公司更是凭借出色的综合实力，先后荣获国家级专精特新“小巨人”企业、广东省高压造影中心、深圳市坪山区突出贡献工业企业、深圳知名品牌等多项荣誉，并与广东医科大学合作设立博士后工作站，进一步强化了产学研深度融合，为技术创新注入持续动力。

公司拥有覆盖全球的销售网络，产品已进驻国内近3000家医院，其中三级医院超过800家，同时远销全球120多个国家和地区，广泛应用于美国、欧洲及其他地区的众多医疗机构。

此外，安特还拥有完善的全球化供应链体系和高端智能生产车间，目前在全球布局四大自有生产基地，分别位于深圳坪山、东莞凤岗、东莞松山湖以及马来西亚，为产品的高质量交付与市场快速响应提供了坚实保障。



深圳坪山园区



东莞松山湖园区



东莞凤岗园区



马来西亚园区

关于安特齿科

安特医疗自2008年起便前瞻布局口腔种植领域，2010年，公司与德国知名植体制造商 A.K.TEK GmbH 达成深度战略合作，引入国际先进技术与管理经验。历经七年潜心研发与持续临床跟踪验证，首款种植体于2014年成功获得CFDA认证，产品性能稳定、临床效果优异，为后续市场化奠定坚实基础。

2017年，广东安特齿科有限公司正式成立，作为安特医疗集团全资子公司，现已发展为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性口腔企业，致力为临床提供覆盖全流程的数字化口腔种植修复一站式解决方案。


公司业务涵盖数字化导板、牙种植体系统、种植配件、种植工具、个性化基台及义齿修复体等全链条产品的研发与制造，赋能临床医生提升诊疗效率与治疗效果。此外，公司还可提供多功能数字化配件定制、数字化即刻负重应用、复杂病例解决方案等增值服务，助力实现更高水准的种植修复效果。

凭借突出的创新与研发实力，安特齿科先后获评国家高新技术企业、广东省专精特新企业、东莞市数字化种植修复工程技术研究中心、东莞市瞪羚企业、优秀创新型规上企业等多项荣誉，在口腔种植领域拥有广泛认可与良好口碑。未来，安特齿科将以核心加工技术为支撑，持续引入前沿数字化技术，为广大医生提供更加优化、精准、高效的口腔种植一站式解决方案。



D-SLA纯净钛表面技术 重新定义骨结合

- 更纯净: 100%纯净钛表面, 生物相容性至极
- 更安全: 球形喷砂+16道洁净, 从源头杜绝污染
- 更强大: 微观结构升级, 实现更快更强的骨结合

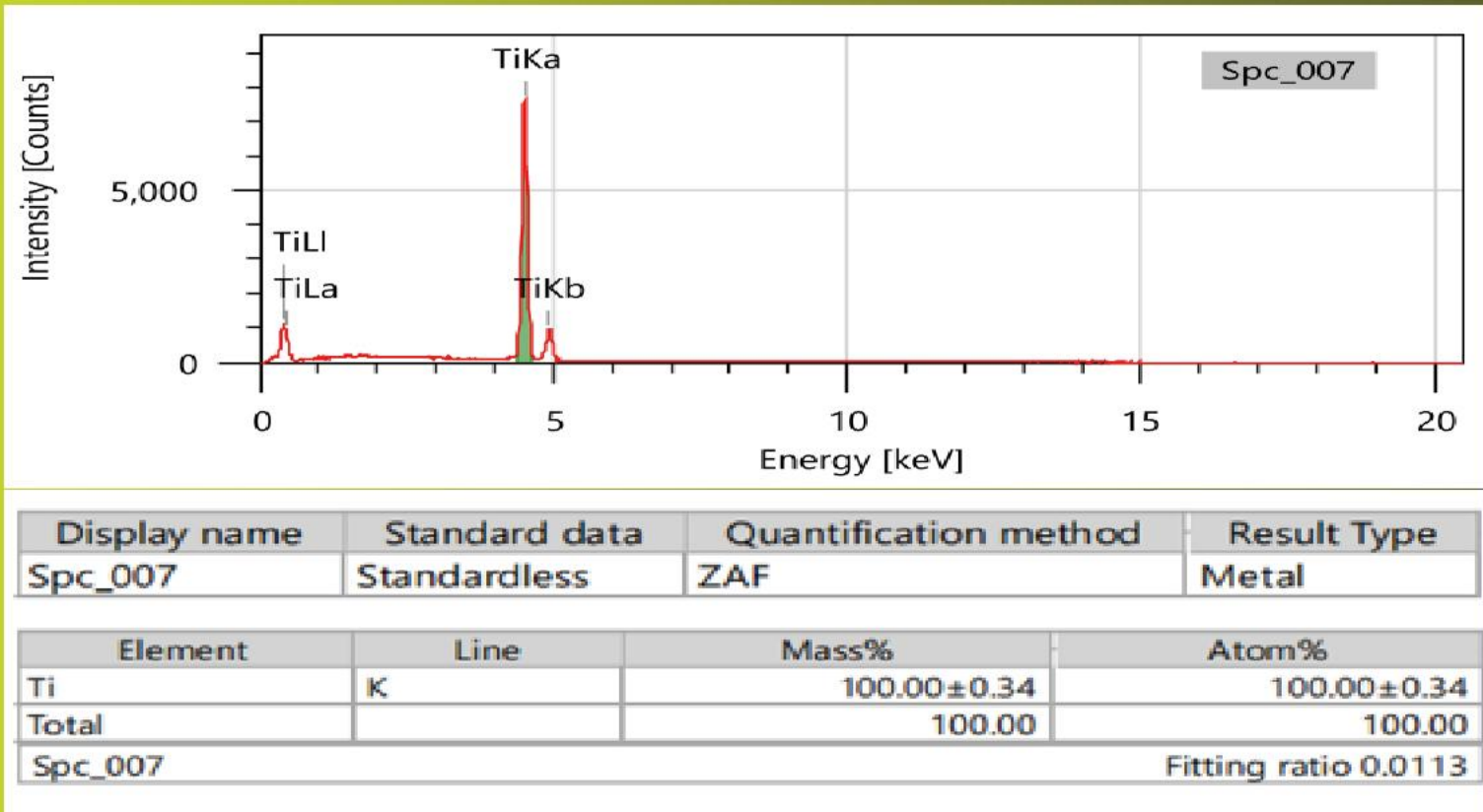

始于纯净, 成于结合

植体设计特点

稳健植入 恒久相伴

- 1 仿生锥形设计:咬合力均匀分散,有效减少骨吸收
- 2 双螺纹设计:有效缩短植入时间,提高植入效率
- 3 莫氏锥度连接:内六角莫氏锥度连接,隔绝细菌微渗漏,载荷传递
- 4 平台化统一接口:配件通用性强,极大简化临床操作



高强度植体材料


冷作钛工艺,材料强度较常规种植体提升约30%,长期稳定



原厂精密配件系统


超低间隙钛合金制造,精密咬合,有效防范微动磨损与机械故障

卓越材料·持久可靠

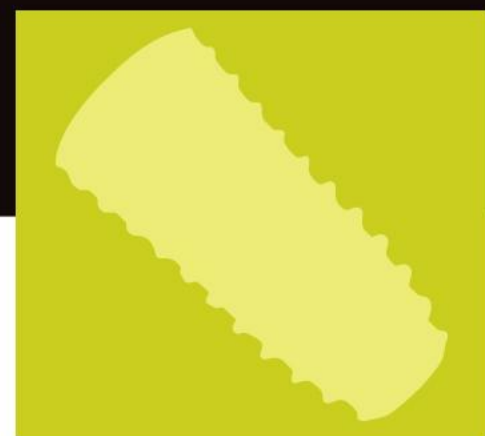

无接触式包装 锁住纯净,一步到位

- ☑ 源头洁净:生产至包装全程无接触,杜绝污染及杂质
- ☑ 过程安全:内固定设计,杜绝储运过程中的摩擦与震荡
- ☑ 术中高效:一体化快速拆卸设计,转移更快捷

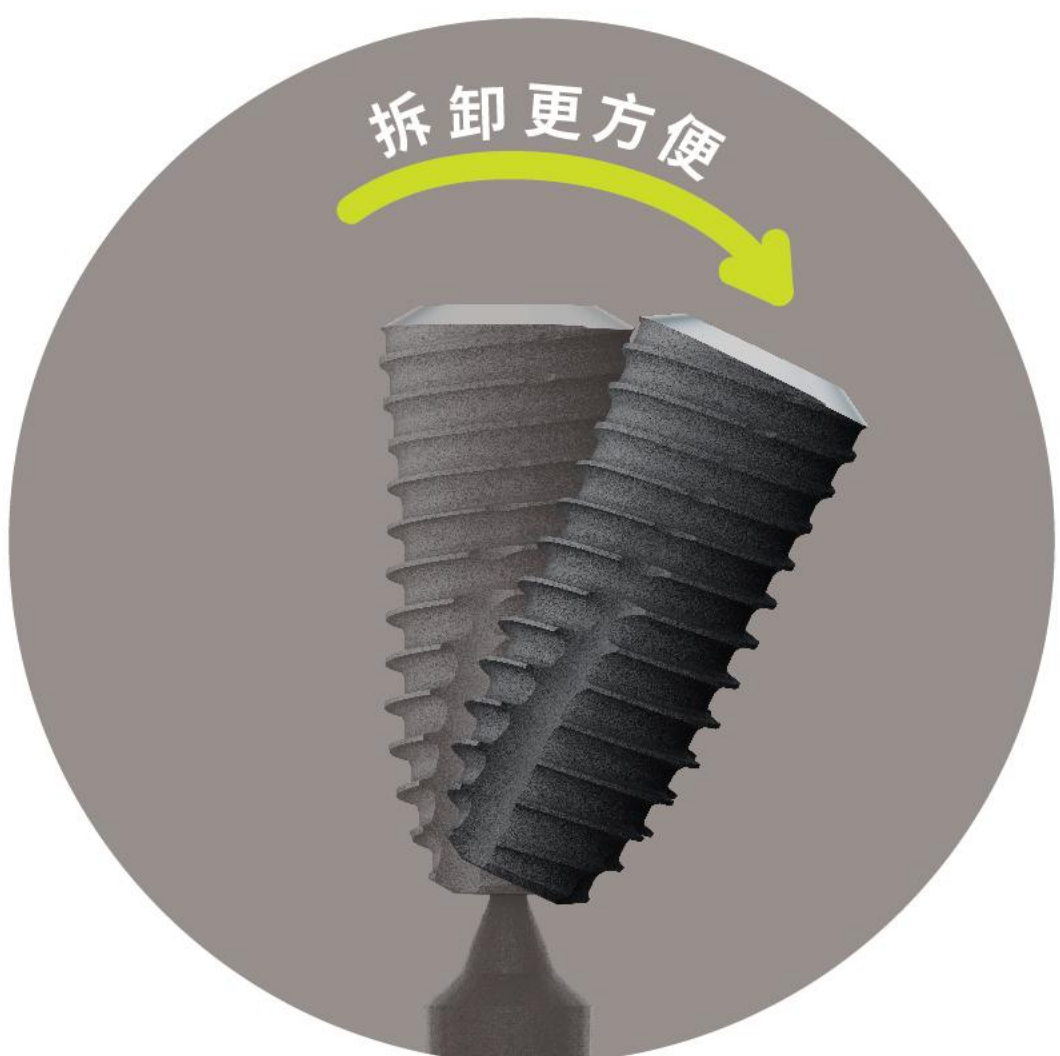


种植体




- 包装单位:种植体*1个,覆盖螺丝 (0.4mm高度) *1个
- 种植体材料:高端进口冷作钛
- 覆盖螺丝材料:低间隙钛合金
- 如需要其他型号的覆盖螺丝,可单独采购
- 植体建议植入扭力:≤45N.cm
- 覆盖螺丝建议手动旋紧即可 (5-10N.cm)


直径: 3.6mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100004-019	7
K301100004-010	8
K301100004-005	10
K301100004-008	12
K301100004-015	14

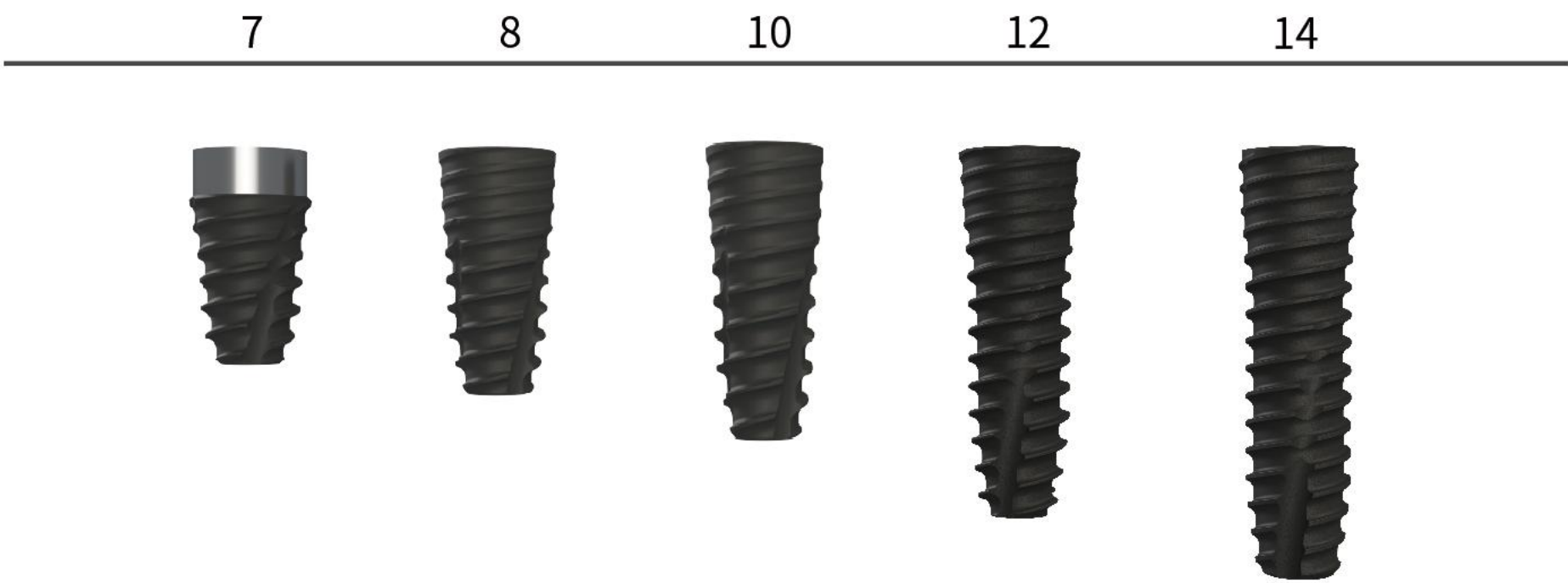


直径: 4.0mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100004-020	7
K301100004-001	8
K301100004-002	10
K301100004-009	12
K301100004-016	14

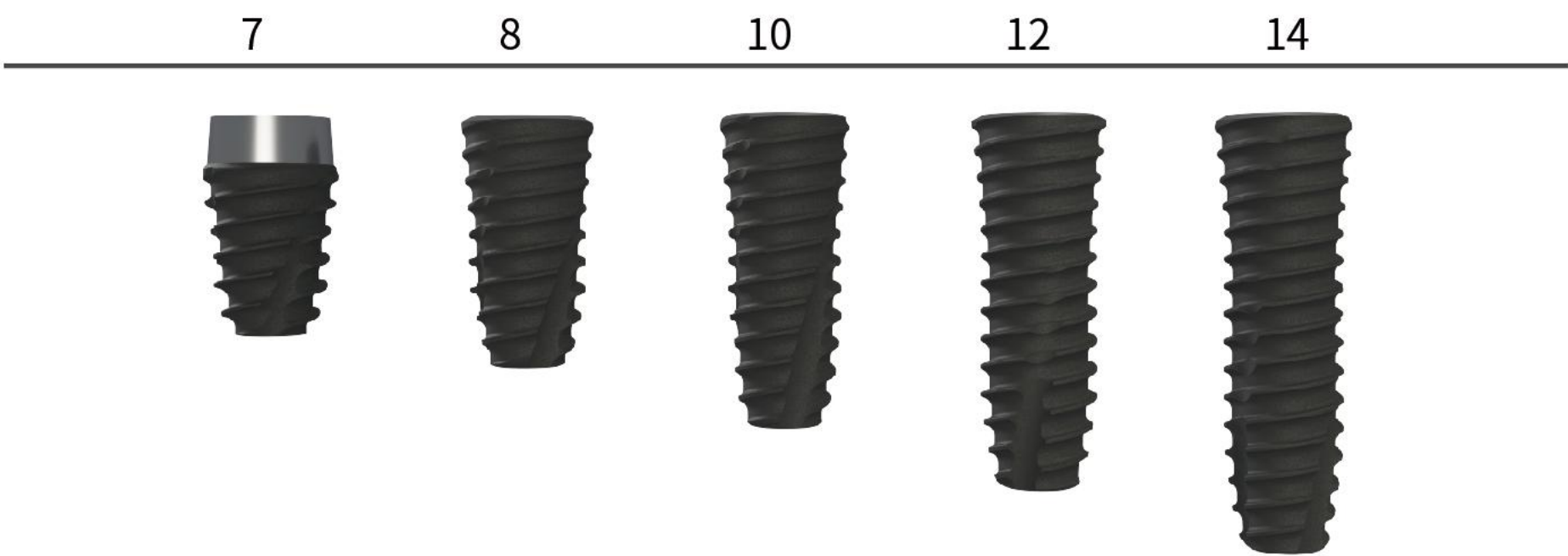


直径: 4.5mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100004-013	7
K301100004-003	8
K301100004-004	10
K301100004-011	12
K301100004-017	14

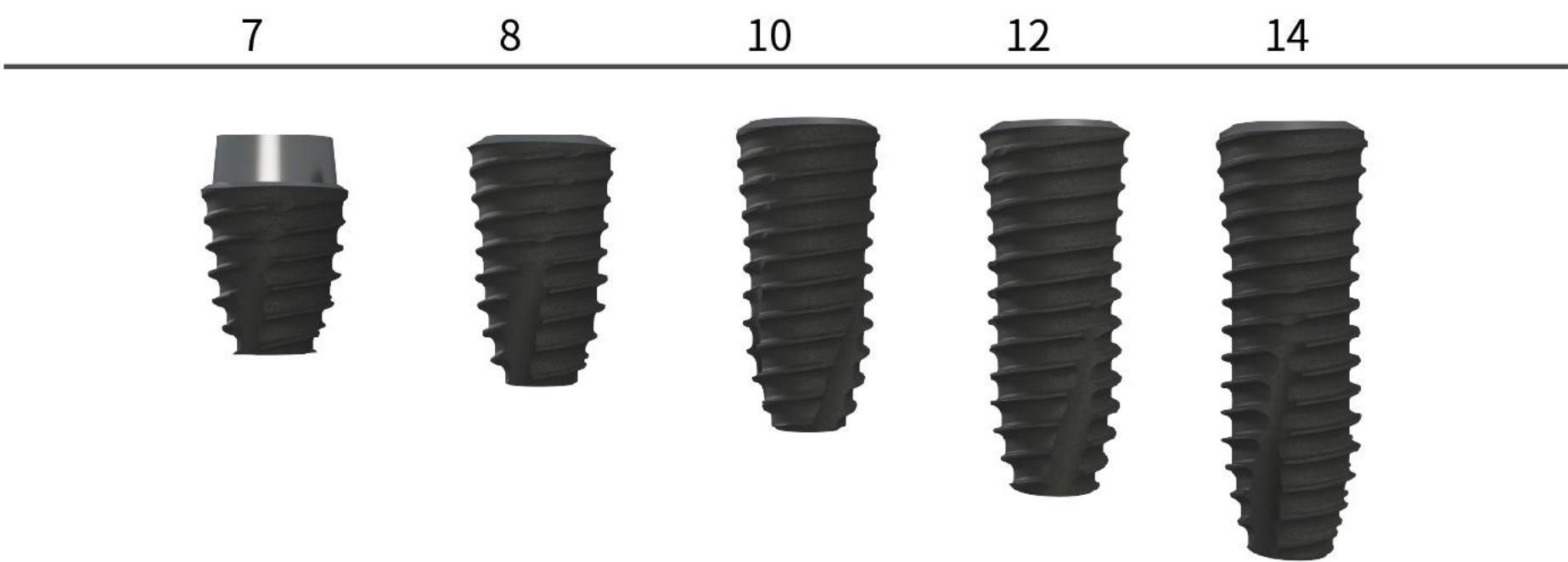


直径: 5.0mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100004-014	7
K301100004-006	8
K301100004-007	10
K301100004-012	12
K301100004-018	14

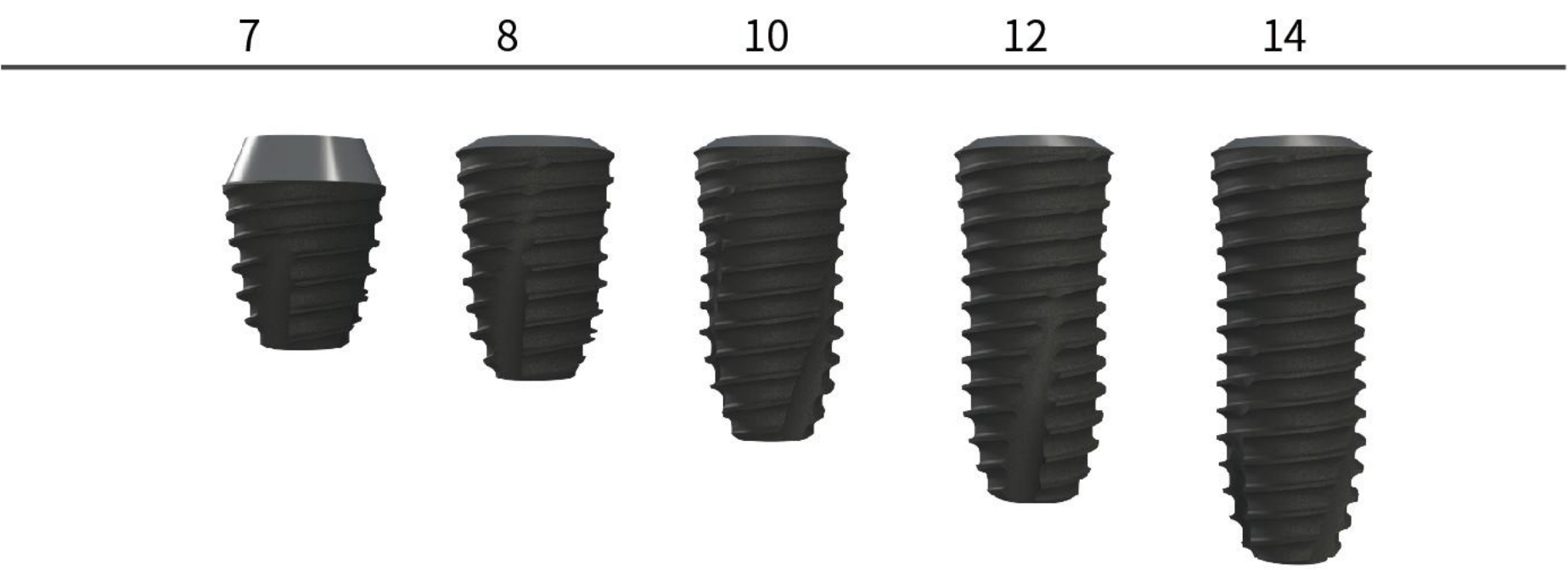


直径: 6.0mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100004-021	7
K301100004-022	8
K301100004-023	10
K301100004-024	12

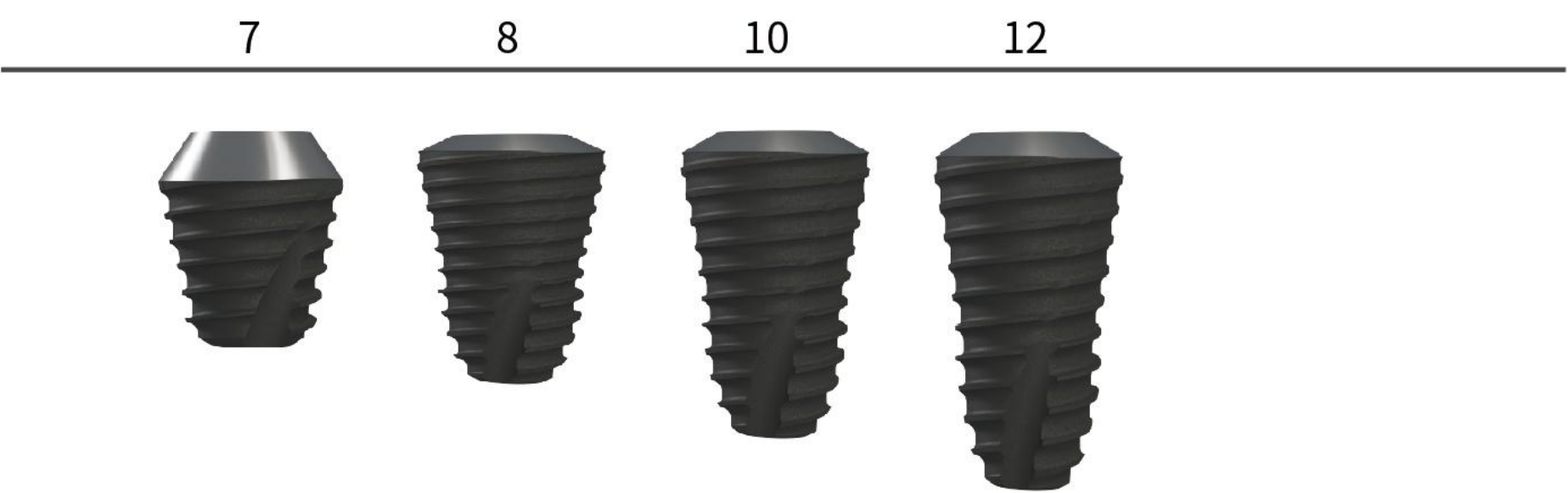

直径: 7.0mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100004-025	7
K301100004-026	8
K301100004-027	10
K301100004-028	12

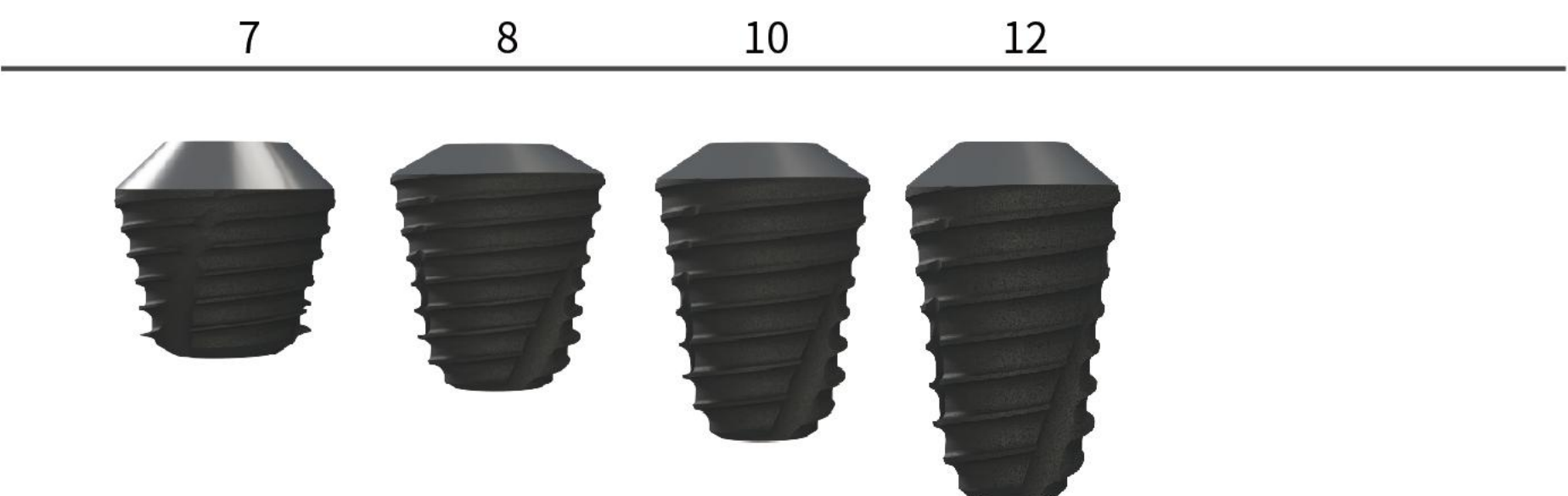

覆盖螺丝

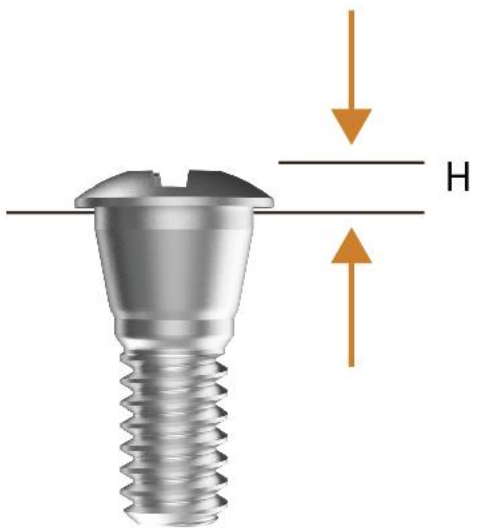


编码	产品描述	平台	高度 H(mm)
K301702004-001	覆盖螺丝	常规	0.4


- 包装单位: 1*覆盖螺丝
- 材料: 医用钛合金
- 植入植体后,用于封闭植体内腔
- 根据接口和高度选择
- 使用Hex1.27六角螺丝刀拧紧
- 建议拧紧扭矩: 8~10 N.cm

修复配件

修复程序 I（标准种植修复）

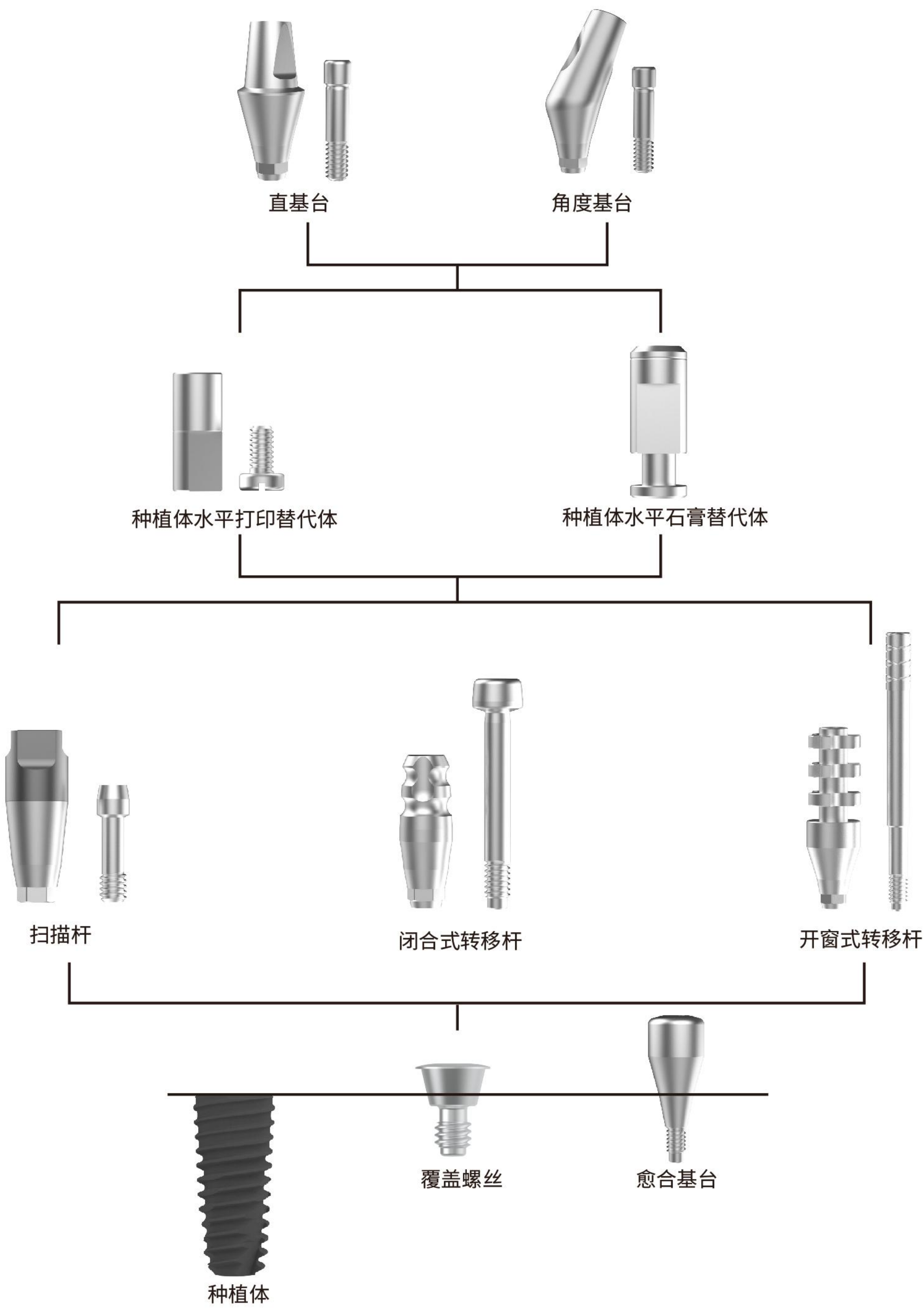


愈合基台

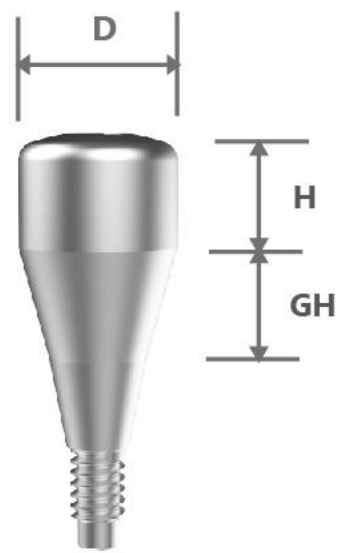

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301201004-012	愈合基台-标准型φ4.0-GH2.0-H2.0	4.0	2.0	0.0
K301201004-001	愈合基台-标准型φ4.0-GH2.0	4.0	2.0	1.5
K301201004-002	愈合基台-标准型φ4.0-GH3.0	4.0	3.0	2.0
K301201004-011	愈合基台-标准型φ4.0-GH4.0	4.0	4.0	3.0
K301201004-013	愈合基台-标准型φ4.5-GH2.0-H2.0	4.5	2.0	0.0
K301201004-003	愈合基台-标准型φ4.5-GH2.0	4.5	2.0	1.5
K301201004-004	愈合基台-标准型φ4.5-GH3.0	4.5	3.0	2.0
K301201004-005	愈合基台-标准型φ4.5-GH4.0	4.5	4.0	3.0
K301201004-014	愈合基台-标准型φ5.5-GH2.0-H2.0	5.5	2.0	0.0
K301201004-006	愈合基台-标准型φ5.5-GH2.0	5.5	2.0	1.5
K301201004-007	愈合基台-标准型φ5.5-GH3.0	5.5	3.0	2.0
K301201004-008	愈合基台-标准型φ5.5-GH4.0	5.5	4.0	3.0
K301201004-015	愈合基台-标准型φ6.5-GH2.0-H2.0	6.5	2.0	0.0
K301201004-009	愈合基台-标准型φ6.5-GH2.0	6.5	2.0	1.5
K301201004-010	愈合基台-标准型φ6.5-GH3.0	6.5	3.0	2.0
K301201004-018	愈合基台-标准型φ6.5-GH4.0	6.5	4.0	3.0
K301201004-016	愈合基台-标准型φ7.5-GH3.0	7.5	3.0	2.0

- 包装单位：1*愈合基台
- 材料：医用钛合金
- 在软组织愈合时，形成穿龈轮廓
- 根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.27六角螺丝刀拧紧
- 建议拧紧扭矩：8~10 N.cm


可研磨基台

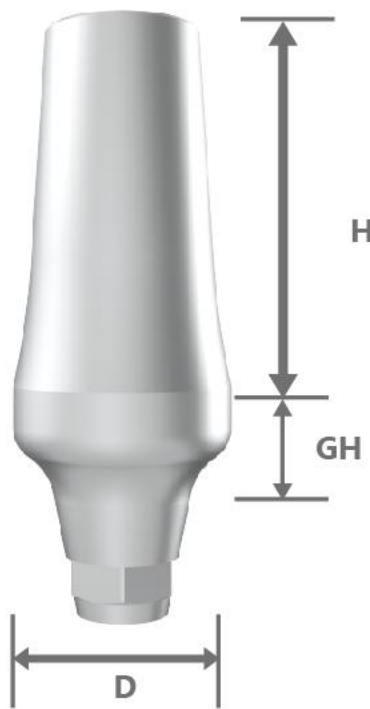

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301202004-033	分体式可研磨基台φ5.5-GH1.5-抗旋	5.5	1.5	9.4
K301202004-034	分体式可研磨基台φ5.5-GH2.0-抗旋	5.5	2.0	9.0
K301202004-035	分体式可研磨基台φ5.5-GH2.5-抗旋	5.5	2.5	8.4

- 包装单位：1*直基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用，根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.27六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


直基台

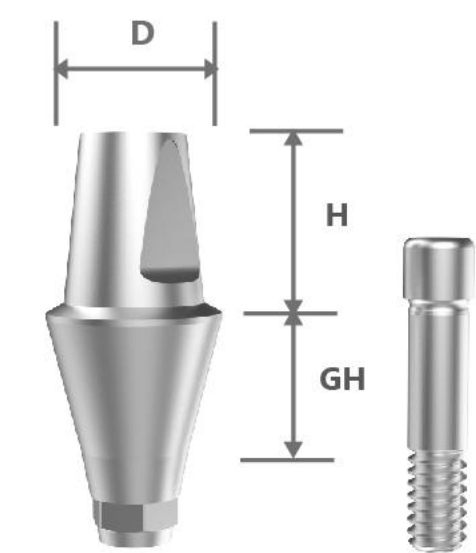

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301202004-028	直基台Φ4.5-GH1.0-抗旋	4.5	1.0	5.5
K301202004-001	直基台Φ4.5-GH1.5-抗旋	4.5	1.5	5.5
K301202004-002	直基台Φ4.5-GH2.5-抗旋	4.5	2.5	5.5
K301202004-003	直基台Φ4.5-GH3.5-抗旋	4.5	3.5	5.5
K301202004-004	直基台Φ4.5-GH4.5-抗旋	4.5	4.5	5.5
K301202004-005	直基台Φ4.5-GH5.5-抗旋	4.5	5.5	5.5
K301202004-006	直基台Φ5.5-GH1.5-抗旋	5.5	1.5	5.5
K301202004-007	直基台Φ5.5-GH2.5-抗旋	5.5	2.5	5.5
K301202004-008	直基台Φ5.5-GH3.5-抗旋	5.5	3.5	5.5
K301202004-009	直基台Φ5.5-GH4.5-抗旋	5.5	4.5	5.5
K301202004-010	直基台Φ5.5-GH5.5-抗旋	5.5	5.5	5.5
K301202004-030	直基台Φ6.5-GH1.5-抗旋	6.5	1.5	5.5
K301202004-011	直基台Φ6.5-GH2.5-抗旋	6.5	2.5	5.5
K301202004-012	直基台Φ6.5-GH3.5-抗旋	6.5	3.5	5.5
K301202004-013	直基台Φ6.5-GH4.5-抗旋	6.5	4.5	5.5
K301202004-029	直基台Φ6.5-GH5.5-抗旋	6.5	5.5	5.5
K301202004-031	直基台Φ4.5-GH1.0-非抗	4.5	1.0	5.5
K301202004-020	直基台Φ4.5-GH1.5-非抗	4.5	1.5	5.5
K301202004-016	直基台Φ4.5-GH2.5-非抗	4.5	2.5	5.5
K301202004-017	直基台Φ4.5-GH3.5-非抗	4.5	3.5	5.5
K301202004-021	直基台Φ4.5-GH4.5-非抗	4.5	4.5	5.5
K301202004-022	直基台Φ4.5-GH5.5-非抗	4.5	5.5	5.5
K301202004-023	直基台Φ5.5-GH1.5-非抗	5.5	1.5	5.5
K301202004-018	直基台Φ5.5-GH2.5-非抗	5.5	2.5	5.5
K301202004-019	直基台Φ5.5-GH3.5-非抗	5.5	3.5	5.5
K301202004-024	直基台Φ5.5-GH4.5-非抗	5.5	4.5	5.5
K301202004-025	直基台Φ5.5-GH5.5-非抗	5.5	5.5	5.5

- 包装单位：1*直基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用，根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.27六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


基底基台

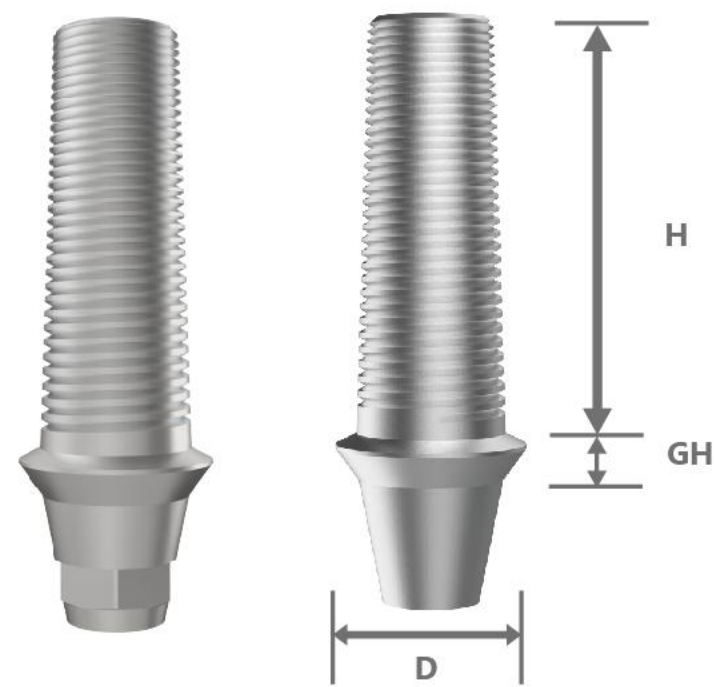

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301202004-026	基底基台Φ4.5-GH1.0-抗旋	4.5	1.0	10.0
K301202004-027	基底基台Φ4.5-GH1.0-非抗	4.5	1.0	10.0

- 包装单位：1*直基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用，根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.27六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


角度基台

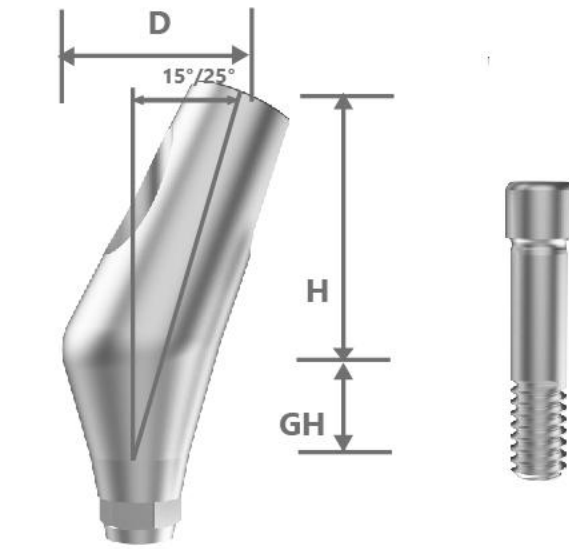

编码	产品描述	角度 A(°)	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301203004-026	角度基台Φ4.5-GH1.5-15度-抗旋	15	4.5	1.5	9.0
K301203004-001	角度基台Φ4.5-GH2.0-15度-抗旋	15	4.5	2.0	9.0
K301203004-002	角度基台Φ4.5-GH2.5-15度-抗旋	15	4.5	2.5	9.0
K301203004-003	角度基台Φ4.5-GH3.5-15度-抗旋	15	4.5	3.5	9.0
K301203004-004	角度基台Φ4.5-GH4.0-15度-抗旋	15	4.5	4.0	9.0
K301203004-005	角度基台Φ5.5-GH1.5-15度-抗旋	15	5.5	1.5	9.0
K301203004-006	角度基台Φ5.5-GH2.0-15度-抗旋	15	5.5	2.0	9.0
K301203004-007	角度基台Φ5.5-GH2.5-15度-抗旋	15	5.5	2.5	9.0
K301203004-008	角度基台Φ5.5-GH3.5-15度-抗旋	15	5.5	3.5	9.0
K301203004-009	角度基台Φ5.5-GH4.0-15度-抗旋	15	5.5	4.0	9.0
K301203004-030	角度基台Φ4.5-GH1.5-15度-非抗	15	4.5	1.5	9.0
K301203004-018	角度基台Φ4.5-GH2.0-15度-非抗	15	4.5	2.0	9.0
K301203004-019	角度基台Φ4.5-GH2.5-15度-非抗	15	4.5	2.5	9.0
K301203004-020	角度基台Φ4.5-GH3.5-15度-非抗	15	4.5	3.5	9.0
K301203004-024	角度基台Φ4.5-GH4.0-15度-非抗	15	4.5	4.0	9.0
K301203004-029	角度基台Φ5.5-GH1.5-15度-非抗	15	5.5	1.5	9.0
K301203004-017	角度基台Φ5.5-GH2.0-15度-非抗	15	5.5	2.0	9.0
K301203004-016	角度基台Φ5.5-GH2.5-15度-非抗	15	5.5	2.5	9.0
K301203004-015	角度基台Φ5.5-GH3.5-15度-非抗	15	5.5	3.5	9.0
K301203004-025	角度基台Φ5.5-GH4.0-15度-非抗	15	5.5	4.0	9.0
K301203004-021	角度基台Φ4.5-GH2.0-25度-抗旋	25	4.5	2.0	9.0
K301203004-031	角度基台Φ4.5-GH2.5-25度-抗旋	25	4.5	2.5	9.0
K301203004-010	角度基台Φ4.5-GH4.0-25度-抗旋	25	4.5	4.0	9.0
K301203004-033	角度基台Φ5.5-GH1.5-25度-抗旋	25	5.5	1.5	9.0
K301203004-022	角度基台Φ5.5-GH2.0-25度-抗旋	25	5.5	2.0	9.0
K301203004-035	角度基台Φ5.5-GH2.5-25度-抗旋	25	5.5	2.5	9.0
K301203004-036	角度基台Φ5.5-GH3.5-25度-抗旋	25	5.5	3.5	9.0
K301203004-023	角度基台Φ5.5-GH4.0-25度-抗旋	25	5.5	4.0	9.0
K301203004-032	角度基台Φ4.5-GH2.0-25度-非抗	25	4.5	2.0	9.0
K301203004-012	角度基台Φ4.5-GH2.5-25度-非抗	25	4.5	2.5	9.0
K301203004-011	角度基台Φ4.5-GH4.0-25度-非抗	25	4.5	4.0	9.0
K301203004-034	角度基台Φ5.5-GH1.5-25度-非抗	25	5.5	1.5	9.0
K301203004-027	角度基台Φ5.5-GH2.0-25度-非抗	25	5.5	2.0	9.0
K301203004-013	角度基台Φ5.5-GH2.5-25度-非抗	25	5.5	2.5	9.0
K301203004-014	角度基台Φ5.5-GH3.5-25度-非抗	25	5.5	3.5	9.0
K301203004-028	角度基台Φ5.5-GH4.0-25度-非抗	25	5.5	4.0	9.0

- 包装单位：1*角度基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 抗旋接口，六个可调整方向
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用
- 根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.27六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


种植体水平闭合式转移杆

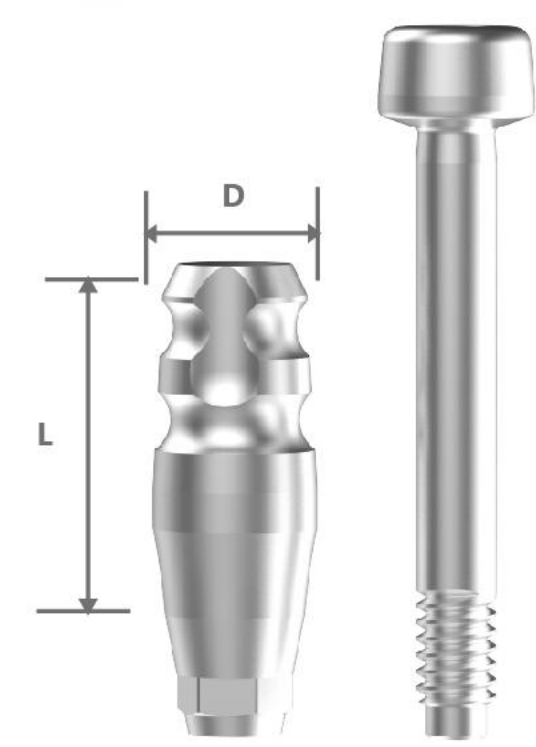

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301302004-005	种植体水平闭合式转移杆D40L11-抗旋	4.0	11
K301302004-006	种植体水平闭合式转移杆D40L15-抗旋	4.0	15
K301302004-001	种植体水平闭合式转移杆D45L11-抗旋	4.5	11
K301302004-002	种植体水平闭合式转移杆D45L15-抗旋	4.5	15
K301302004-003	种植体水平闭合式转移杆D55L11-抗旋	5.5	11
K301302004-004	种植体水平闭合式转移杆D55L15-抗旋	5.5	15

- 包装单位: 1 *闭合式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料: 医用钛合金
- 抗旋, 植体水平闭合式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用Hex1.27六角螺丝刀, 手动拧紧即可


种植体水平开窗式转移杆

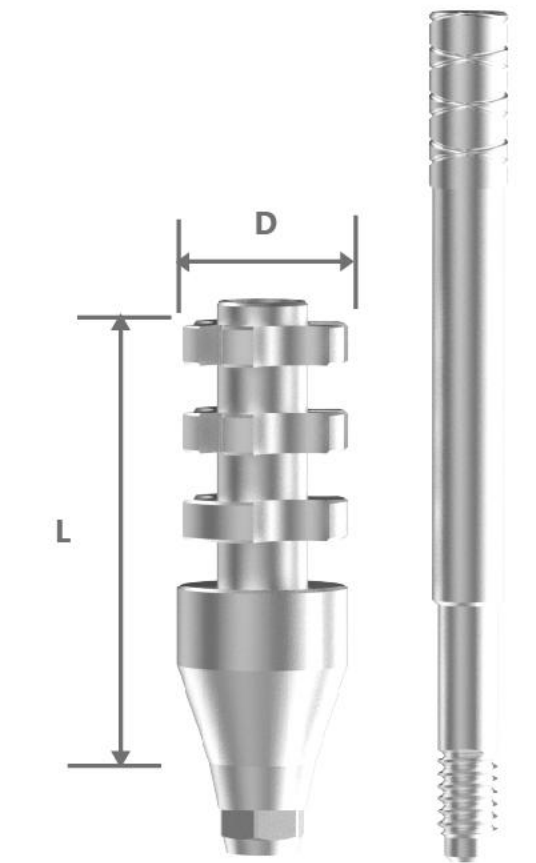

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301301004-005	种植体水平开窗式转移杆D40L17-抗旋	4.0	17
K301301004-006	种植体水平开窗式转移杆D40L21-抗旋	4.0	21
K301301004-001	种植体水平开窗式转移杆D45L17-抗旋	4.5	17
K301301004-002	种植体水平开窗式转移杆D45L21-抗旋	4.5	21
K301301004-003	种植体水平开窗式转移杆D55L17-抗旋	5.5	17
K301301004-004	种植体水平开窗式转移杆D55L21-抗旋	5.5	21
K301301004-007	种植体水平开窗式转移杆D65L17-抗旋	6.5	17
K301301004-009	种植体水平开窗式转移杆D65-L21-抗旋	6.5	21

- 包装单位: 1 *开窗式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料: 医用钛合金
- 抗旋, 植体水平开窗式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用Hex1.27六角螺丝刀, 手动拧紧即可


植体水平石膏替代体

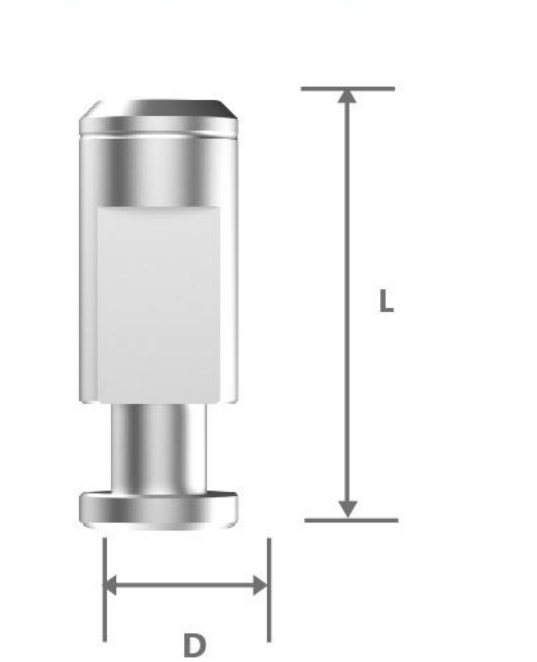

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301601004-001	种植体水平石膏替代体	4.5	12

- 包装单位: 1 *替代体
- 材料: 医用钛合金/医用不锈钢
- 传统石膏倒模用, 将口内的种植体重现在石膏技工模型上
- 植体水平取模通用款


植体水平打印替代体

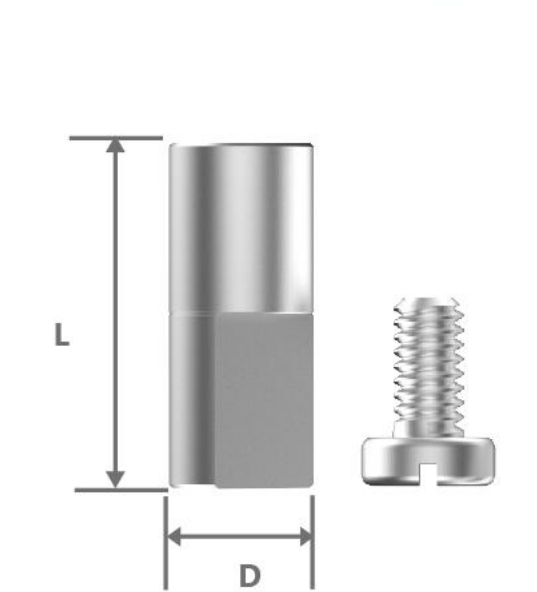

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301602004-001	种植体水平打印替代体	4.0	9.5

- 包装单位: 1 *替代体, 1*替代体底部螺丝
- 材料: 医用钛合金/医用不锈钢
- 口扫打印模型用, 将口内的种植体重现在树脂技工模型上
- 植体水平取模、口扫通用款

种植体水平扫描杆

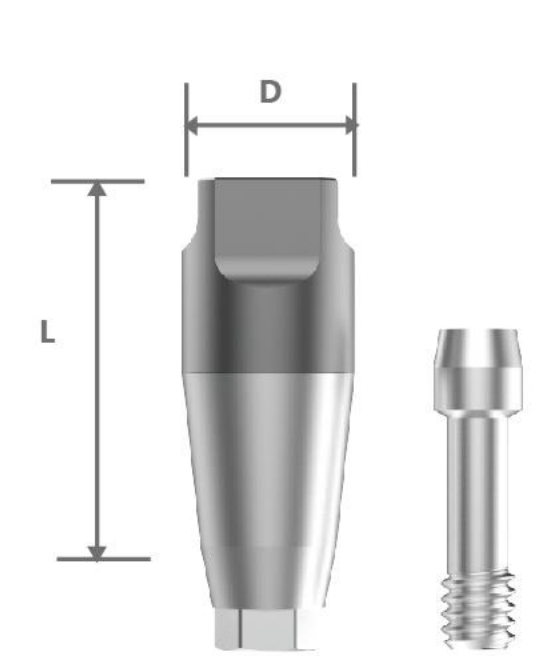


编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301404004-002	种植体水平扫描杆R4.8-D4.5-L10	4.5	10
K301404004-003	种植体水平扫描杆R4.8-D4.5-L15	4.5	15


- 包装单位: 1 *植体水平扫描杆, 1*中央螺丝
- 材料: 医用钛合金
- 抗旋, 植体水平口扫用
- 搭配中央螺丝使用
- 口扫时, 扫描模式选择种植模式
- 使用口扫, 需配套使用数字化替代体
- 使用Hex1.27六角螺丝刀, 手动拧紧即可

修复配件

修复程序 II（桥架类修复）

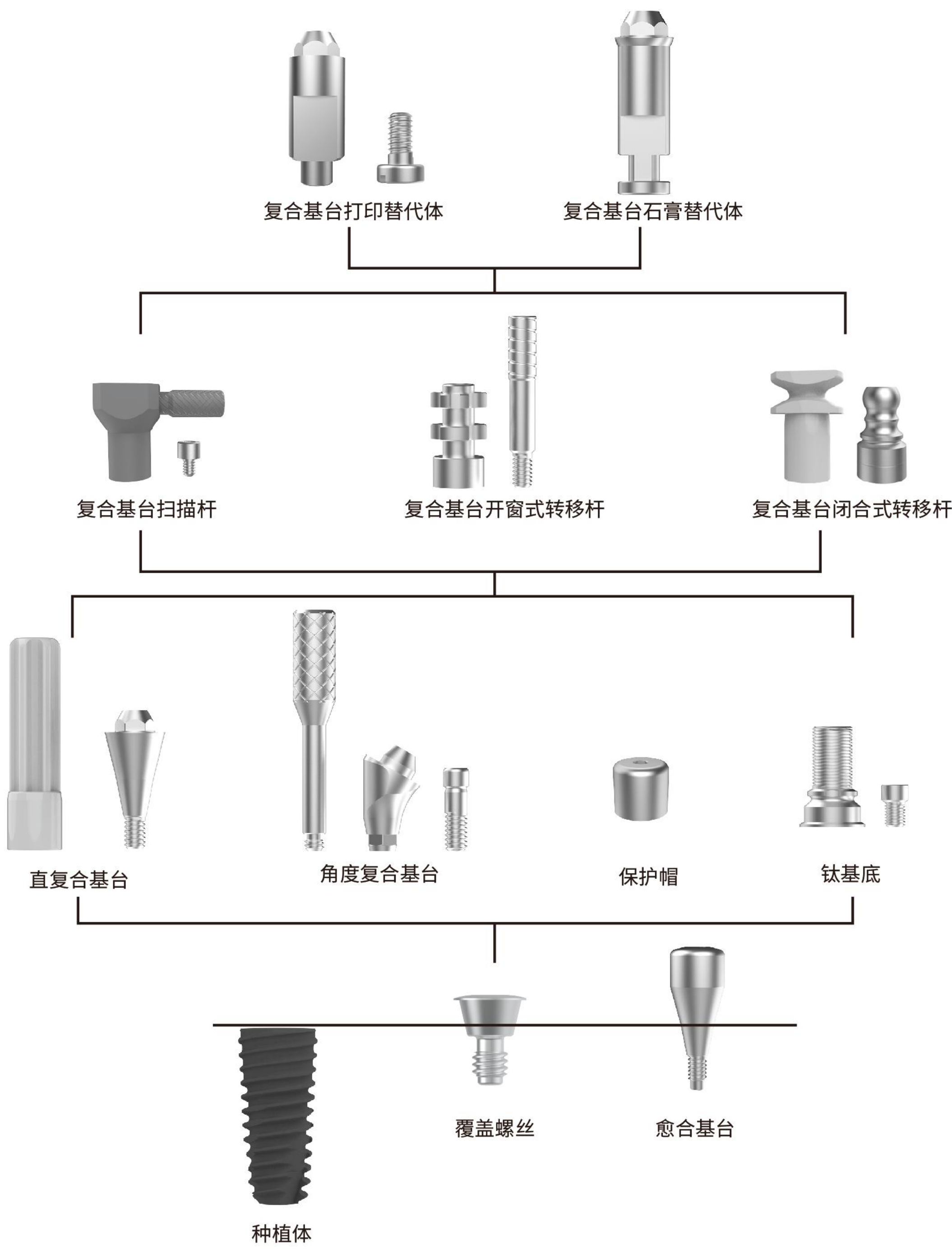


直复合基台

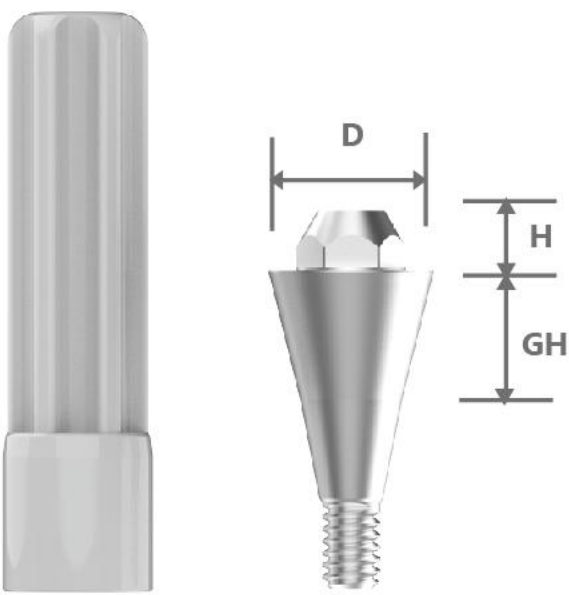

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301204004-001	直复合基台Φ4.5-GH1.0	4.5	1.0	2.0
K301204004-002	直复合基台Φ4.5-GH1.5	4.5	1.5	2.0
K301204004-003	直复合基台Φ4.5-GH2.5	4.5	2.5	2.0
K301204004-004	直复合基台Φ4.5-GH3.5	4.5	3.5	2.0
K301204004-005	直复合基台Φ4.5-GH4.5	4.5	4.5	2.0
K301204004-006	直复合基台Φ4.5-GH5.5	4.5	5.5	2.0
K301204004-007	直复合基台Φ5.5-GH1.5	5.5	1.5	2.0
K301204004-008	直复合基台Φ5.5-GH2.5	5.5	2.5	2.0
K301204004-009	直复合基台Φ5.5-GH3.5	5.5	3.5	2.0
K301204004-010	直复合基台Φ5.5-GH4.5	5.5	4.5	2.0
K301204004-011	直复合基台Φ5.5-GH5.5	5.5	5.5	2.0

- 包装单位：1*直复合基台，1*辅助手柄
- 材料：医用钛合金
- 螺丝与基台一体型
- 矫正就位道，桥架修复用
- 如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用套筒扳手，与扭力扳手或者手机配合拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 基台水平取模


角度复合基台

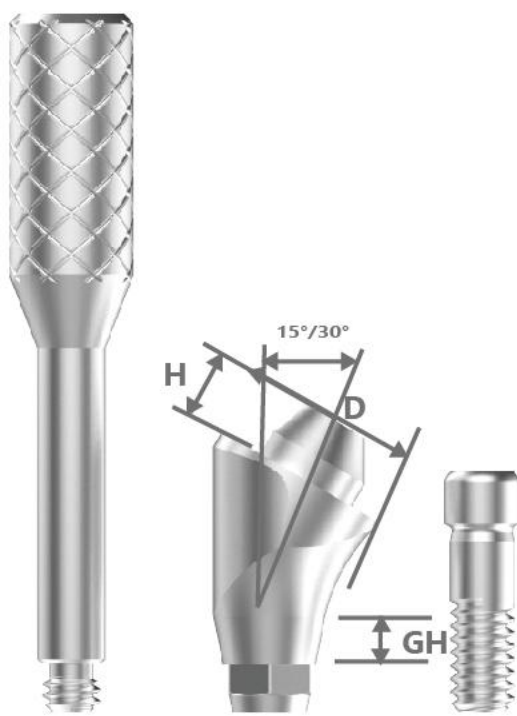

编码	产品描述	角度 A(°)	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301205004-001	角度复合基台Φ4.5-GH1.0-15度-抗旋	15	4.5	1.0	2.0
K301205004-002	角度复合基台Φ4.5-GH2.0-15度-抗旋	15	4.5	2.0	2.0
K301205004-003	角度复合基台Φ4.5-GH3.0-15度-抗旋	15	4.5	3.0	2.0
K301205004-017	角度复合基台Φ4.5-GH4.0-15度-抗旋	15	4.5	4.0	2.0
K301205004-004	角度复合基台Φ4.5-GH1.0-30度-抗旋	30	4.5	1.0	2.0
K301205004-005	角度复合基台Φ4.5-GH2.0-30度-抗旋	30	4.5	2.0	2.0
K301205004-006	角度复合基台Φ4.5-GH3.0-30度-抗旋	30	4.5	3.0	2.0
K301205004-007	角度复合基台Φ4.5-GH4.0-30度-抗旋	30	4.5	4.0	2.0
K301205004-008	角度复合基台Φ4.5-GH5.0-30度-抗旋	30	4.5	5.0	2.0
K301205004-009	角度复合基台Φ5.5-GH1.5-15度-抗旋	15	5.5	1.5	2.0
K301205004-010	角度复合基台Φ5.5-GH3.0-15度-抗旋	15	5.5	3.0	2.0
K301205004-011	角度复合基台Φ5.5-GH1.5-30度-抗旋	30	5.5	1.5	2.0
K301205004-012	角度复合基台Φ5.5-GH3.0-30度-抗旋	30	5.5	3.0	2.0
K301205004-013	角度复合基台Φ5.5-GH2.0-45度-抗旋	45	5.5	2.0	2.0

- 包装单位：1*角度复合基台，1*辅助手柄
- 材料：医用钛合金
- 螺丝与基台分体型，分17°和30°
- 矫正就位道，桥架修复用
- 如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用Hex1.27六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm


复合基台保护帽

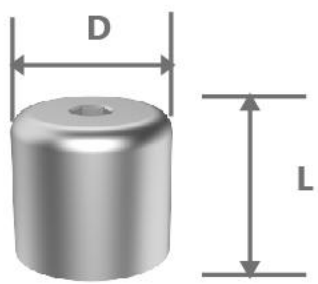

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301501004-003	复合基台保护帽D55(分体)	5.5	5.0
K301501004-006	复合基台保护帽D45(一体)	4.5	5.0
K301501004-007	复合基台保护帽D55(一体)	5.5	5.0

- 包装单位：1*保护帽
- 材料：医用钛合金
- 暂时封堵复合基台二级接口螺丝孔，或复合基台水平牙龈成型
- 一体式，使用Hex1.27六角螺丝刀手动拧紧


复合基台钛基底

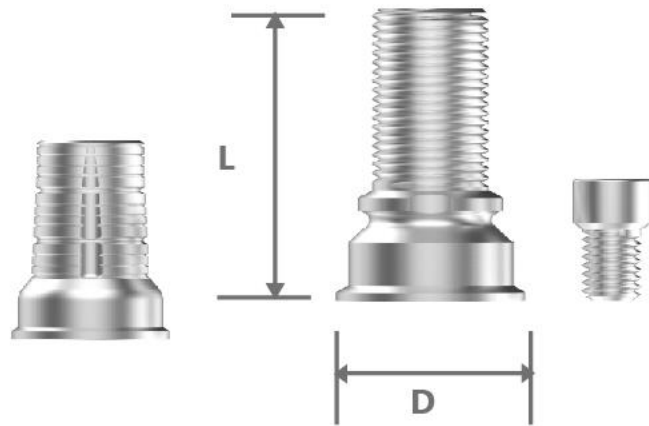

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301502004-001	复合基台钛基底φ4.5-非抗	4.5	8.0
K301502004-002	复合基台钛基底φ5.5-非抗	5.5	8.0
K301502004-008	数字化复合基台钛基底非抗	4.5	8.0

- 包装单位：1*临时基台，1*桥用螺丝
- 材料：医用钛合金
- 非抗接口，临时修复用
- 与桥用螺丝配套使用
- 分别对应2/4/6/8四个高度
- 分石膏和数字化两款，如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用Hex1.27六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：20 N.cm
- 适用于复合基台水平取模案例


复合基台开窗式转移杆

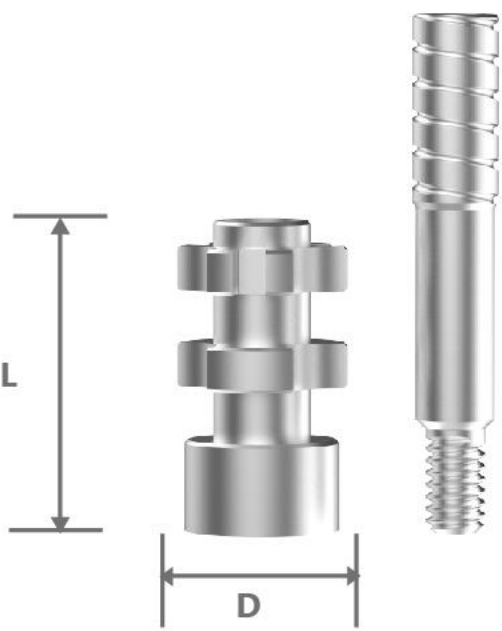

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301303004-001	复合基台开窗式转移杆D45-非抗	4.5	9.0
K301303004-007	复合基台开窗式转移杆D55-非抗	5.5	9.0

- 包装单位: 1 *开窗式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料：医用钛合金
- 非抗，复合基台水平开窗式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用Hex1.27六角螺丝刀，手动拧紧即可


复合基台闭合式转移杆

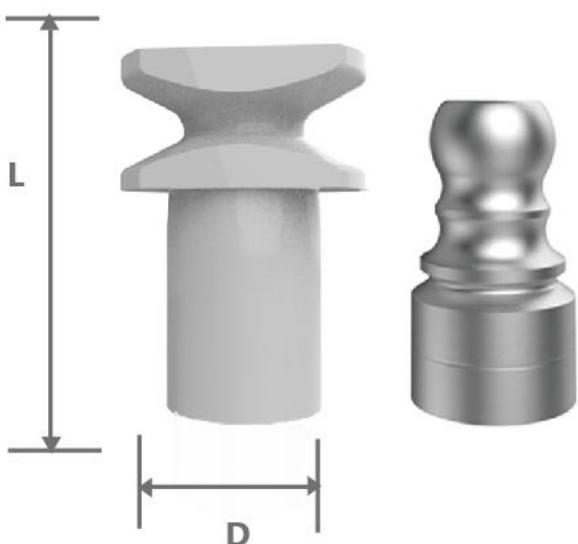

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301501004-005	复合基台闭合转移帽φ4.5-L8	4.5	8.0
K301501001-012	复合基台闭合转移杆-配套印模帽	4.8	11.0

- 包装单位：1*闭口式金属转移帽、1*塑料印模帽(单独采购)
- 材料：医用钛合金、医用塑料
- 非抗，复合基台水平闭口式取模用
- 两个搭配使用，用于即刻负重临时牙取模，不建议用于永久性修复取模


复合基台石膏替代体

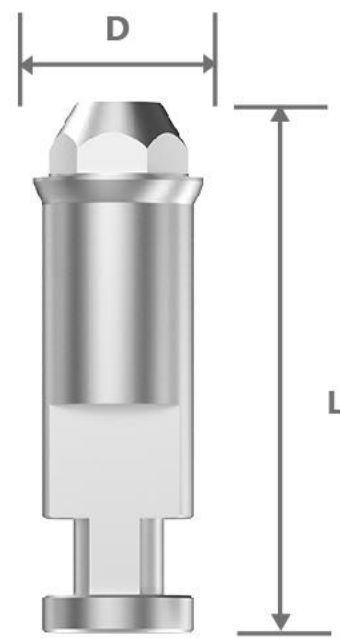

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301603004-001	复合基台石膏替代体φ4.5	4.5	14
K301603004-002	复合基台石膏替代体φ5.5	5.5	14

- 包装单位: 1 *替代体
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 传统石膏倒模用，将口内的复合基台的位置重现在石膏技工模型上
- 复合基台水平取模通用款


复合基台打印替代体

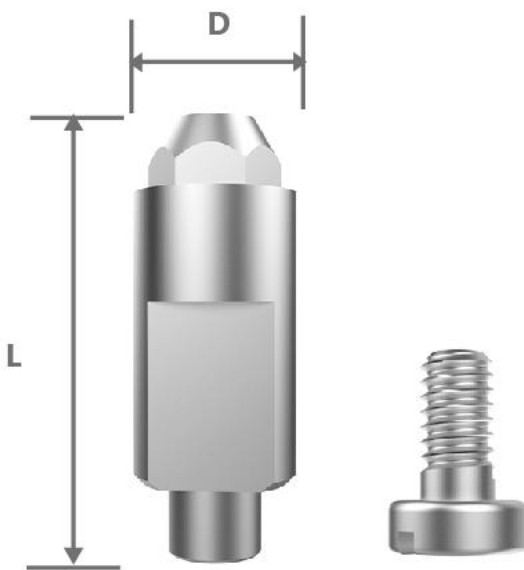

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301604004-001	复合基台打印替代体φ4.5	4.5	12.0
K301604004-002	复合基台打印替代体φ5.5	5.5	12.0

- 包装单位: 1 *替代体，1*替代体底部螺丝
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 口扫打印模型用，将口内的种植体重现在树脂技工模型上
- 复合基台水平取模、口扫通用款

复合基台扫描杆

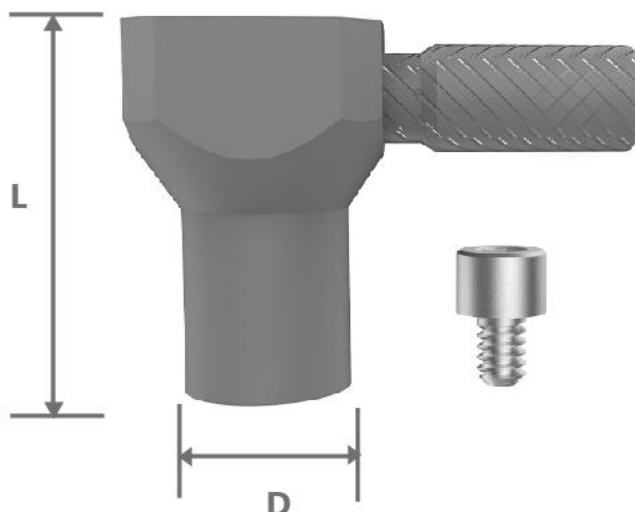

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301403004-001	复合基台扫描杆-艾科邦4.5	4.5	10.0
K301403004-002	复合基台扫描杆-艾科邦5.5	5.5	10.0

- 包装单位: 1 *扫描杆，1*桥用螺丝，1*识别杆
- 材料：医用钛合金
- 非抗，复合基台水平口扫用
- 搭配桥用螺丝使用
- 种植位相隔较近时，无需安装识别杆，相隔较远，需安装识别杆
- 使用口扫，需配套使用复合基台打印替代体