


Dental Implant System
牙种植体系统



普瑞邦
— PreBon —

安特医疗集团旗下植体品牌

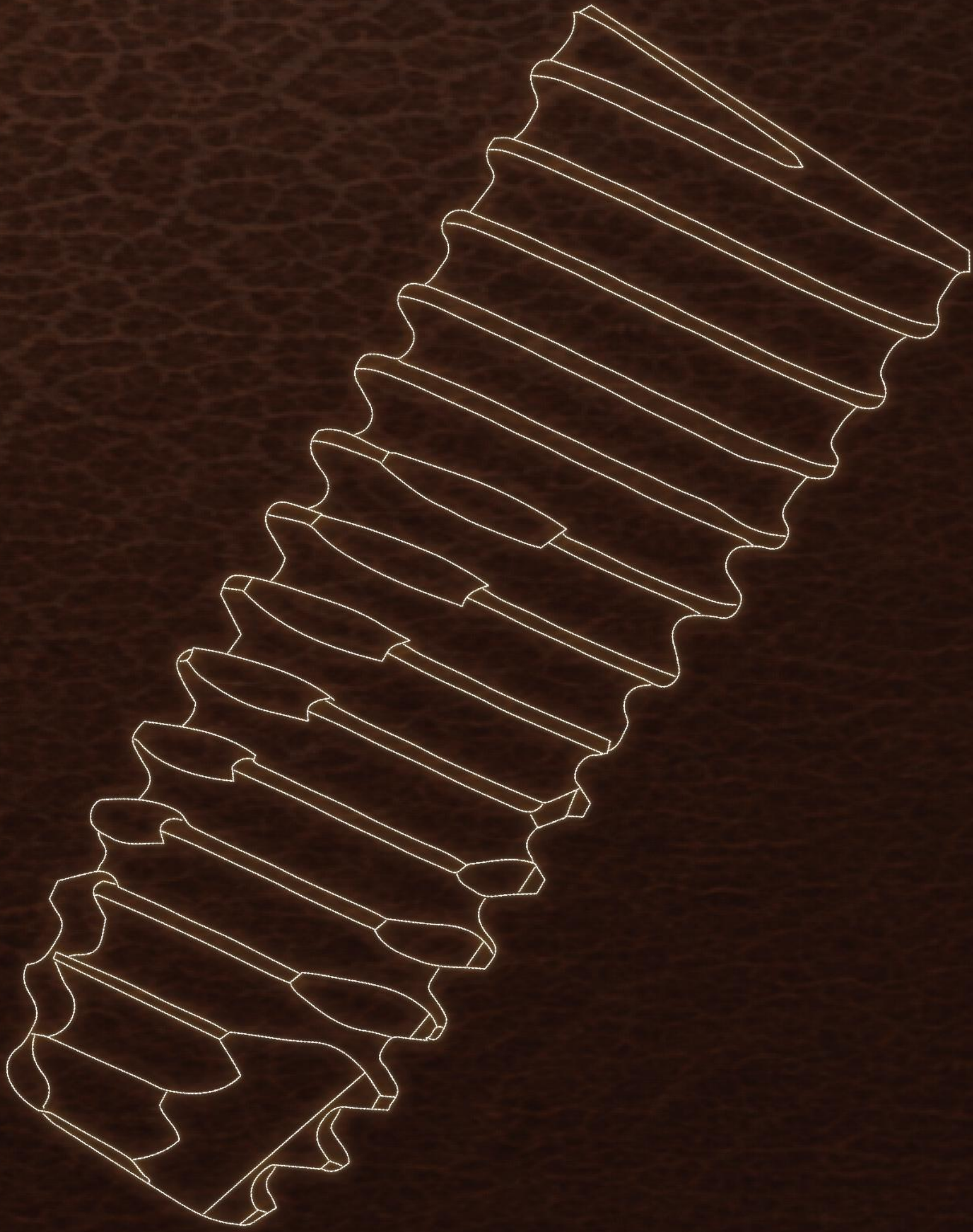

微信公众号



视频号



小红书



让医生种好牙 让患者有好牙

集团介绍

深圳安特医疗股份有限公司成立于2000年，是一家致力于高科技医疗器械研发、生产、销售与服务的专业厂家。主要业务涵盖医学影像、心血管及外周微创介入、口腔医学、麻醉与重症监护等领域。

自创立以来，安特医疗始终坚持创新驱动与质量为先的发展理念，在医疗器械领域持续深耕，展现出卓越的综合实力与发展韧性。公司已连续十五年被评为国家高新技术企业，并连续十年被广东省药品监督管理局评定为A类医疗器械生产企业。2023年，公司更是凭借出色的综合实力，先后荣获国家级专精特新“小巨人”企业、广东省高压造影中心、深圳市坪山区突出贡献工业企业、深圳知名品牌等多项荣誉，并与广东医科大学合作设立博士后工作站，进一步强化了产学研深度融合，为技术创新注入持续动力。

公司拥有覆盖全球的销售网络，产品已进驻国内近3000家医院，其中三级医院超过800家，同时远销全球120多个国家和地区，广泛应用于美国、欧洲及其他地区的众多医疗机构。

此外，安特还拥有完善的全球化供应链体系和高端智能生产车间，目前在全球布局四大自有生产基地，分别位于深圳坪山、东莞凤岗、东莞松山湖以及马来西亚，为产品的高质量交付与市场快速响应提供了坚实保障。




深圳
坪山园区



东莞
松山湖园区



东莞
凤岗园区

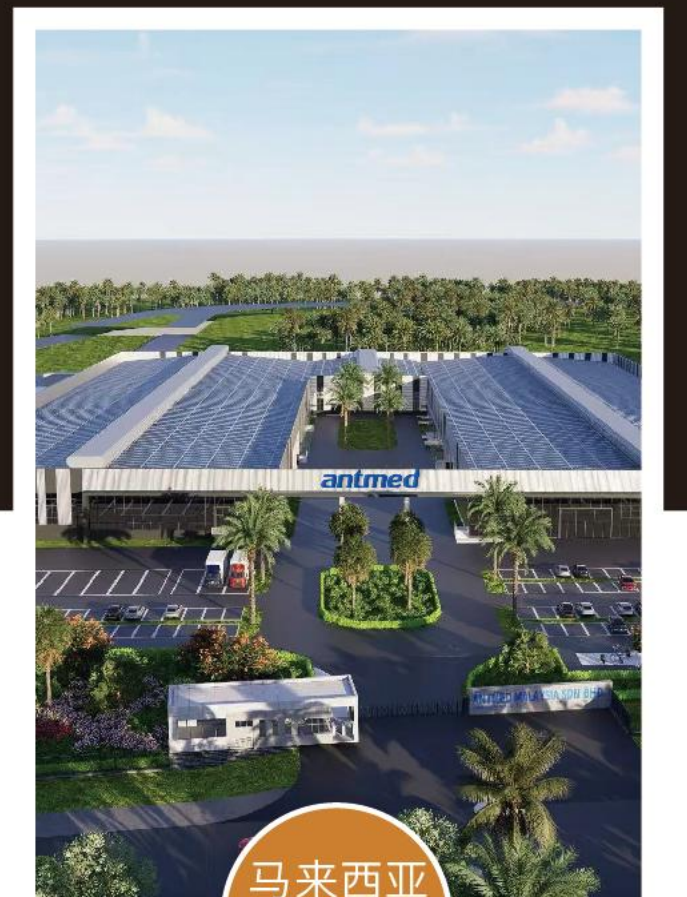

马来西亚
园区

关于安特齿科

安特医疗自2008年起便前瞻布局口腔种植领域，2010年，公司与德国知名植体制造商 A.K.TEK GmbH 达成深度战略合作，引入国际先进技术及制造经验。历经七年潜心研发与持续临床跟踪验证，首款种植体于2014年成功获得CFDA认证，产品性能稳定、临床效果优异，为后续市场化奠定坚实基础。

2017年，广东安特齿科有限公司正式成立，作为安特医疗集团全资子公司，现已发展为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性口腔企业，致力为临床提供覆盖全流程的数字化口腔种植修复一站式解决方案。


公司业务涵盖数字化导板、牙种植体系统、种植配件、种植工具、个性化基台及义齿修复体等全链条产品的研发与制造，赋能临床医生提升诊疗效率与治疗效果。此外，公司还可提供多功能数字化配件定制、数字化即刻负重应用、复杂病例解决方案等增值服务，助力实现更高水准的种植修复效果。

凭借突出的创新与研发实力，安特齿科先后获评国家高新技术企业、广东省专精特新企业、东莞市数字化种植修复工程技术研究中心、东莞市瞪羚企业、优秀创新型规上企业等多项荣誉，在口腔种植领域拥有广泛认可与良好口碑。未来，安特齿科将以核心加工技术为支撑，持续引入前沿数字化技术，为广大医生提供更加优化、精准、高效的口腔种植一站式解决方案。



D-SLA纯净钛表面技术
重新定义骨结合

- 更纯净: 100%纯净钛表面, 生物相容性至极
- 更安全: 球形喷砂+16道洁净, 从源头杜绝污染
- 更强大: 微观结构升级, 实现更快更强的骨结合

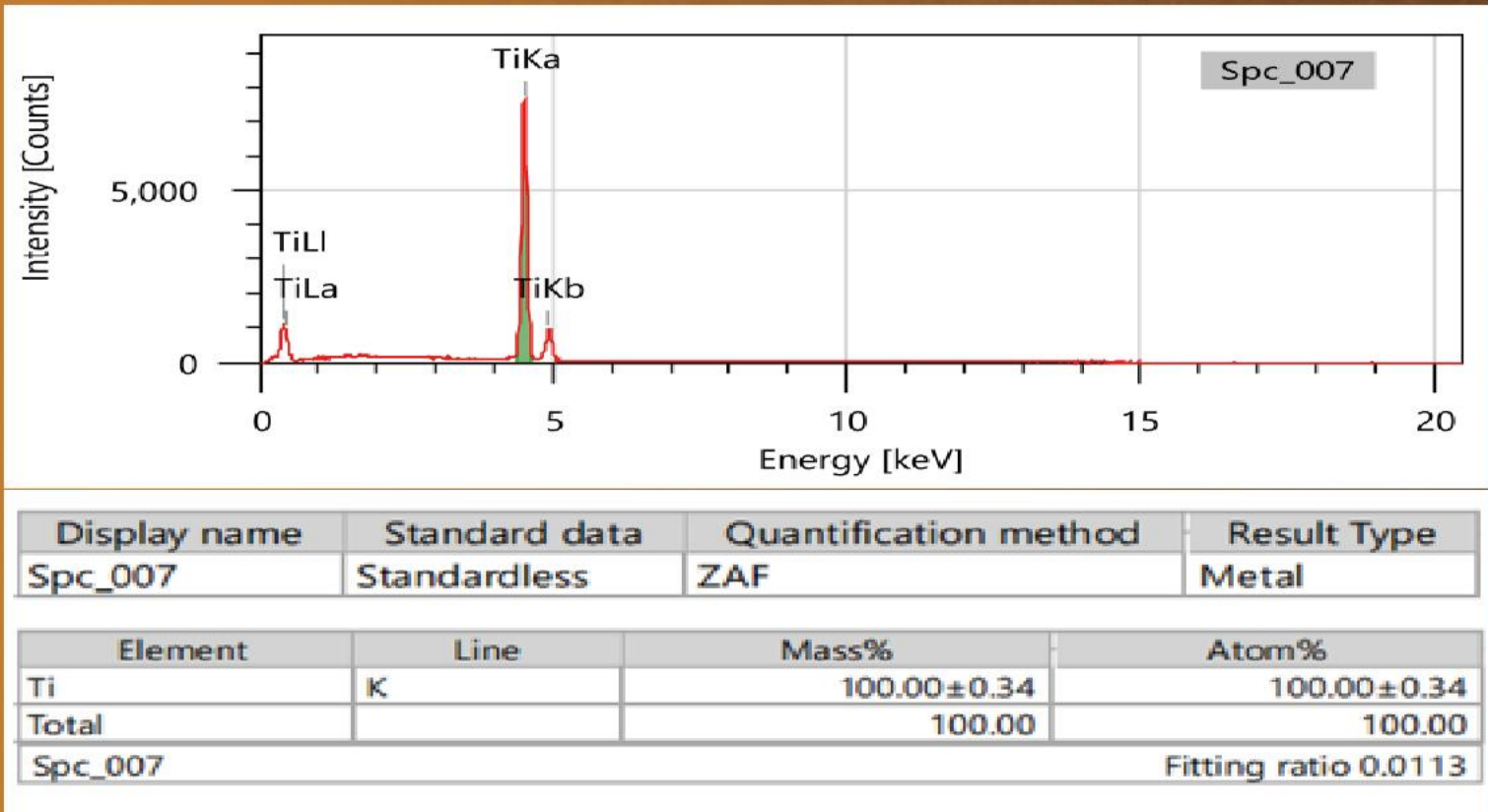

始于纯净, 成于结合

植体设计特点

匠心设计 稳捷合一

- 1 通用锥形结构:操作便捷, 植入高效, 简化临床流程
- 2 变径螺纹设计:适合各类骨条件, 植入更顺滑
- 3 复合螺旋切割槽:高效切割, 轻松攻克坚硬骨质
- 4 莫氏锥度连接:11°莫氏锥度结合内六角抗旋, 实现密闭连接与可靠扭矩传递
- 5 颈缘优化设计:显著增加骨接触面积, 即使在松质骨中也能获得优异的初期稳定性



高强度植体材料

冷作钛工艺, 材料强度较常规种植体提升约30%, 长期稳定



原厂精密配件系统

超低间隙钛合金制造, 精密咬合, 有效防范微动磨损与机械故障

卓越材料·持久可靠



无接触式包装 锁住纯净，一步到位

- ☑ 源头洁净:生产至包装全程无接触, 杜绝污染及杂质
- ☑ 过程安全:内固定设计, 杜绝储运过程中的摩擦与震荡
- ☑ 术中高效:一体化快速拆卸设计, 转移更快捷




种植体



- 包装单位:种植体*1个,覆盖螺丝 (H:0.4mm)*1个
- 种植体材料:高端进口冷作钛
- 覆盖螺丝材料:低间隙钛合金
- 如需要其他型号的覆盖螺丝,可单独采购
- 植体建议植入扭力:≤45N.cm
- 覆盖螺丝建议手动旋紧即可 (5-10N.cm)


直径：3.5mm 平台：迷你

编码	长度/mm
K301100002-003	8.5
K301100002-001	10
K301100002-002	11.5
K301100002-004	13
K301100002-006	15

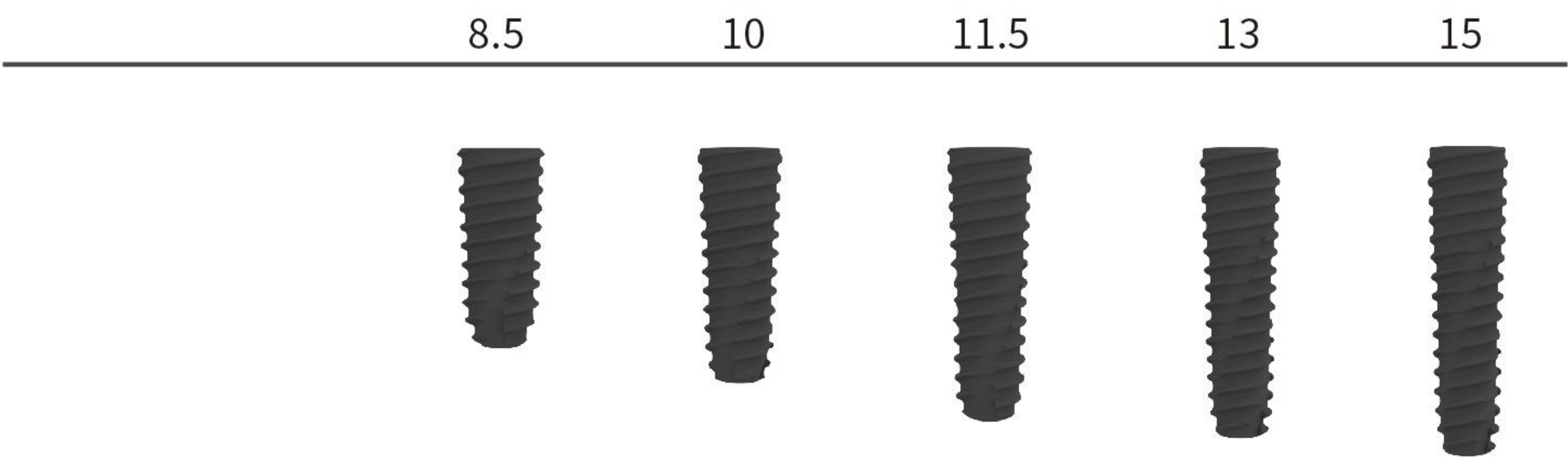


直径：4.0mm 平台：常规

编码	长度/mm
K301100003-021	6
K301100003-015	7
K301100003-001	8.5
K301100003-002	10
K301100003-007	11.5
K301100003-012	13
K301100003-020	15

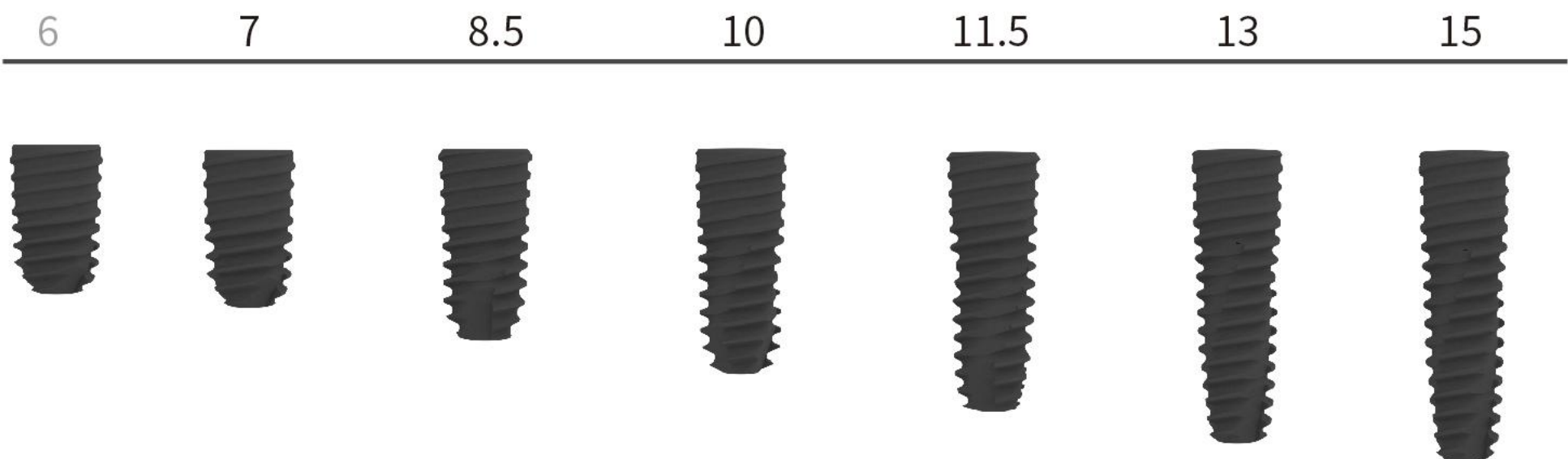


直径：4.5mm 平台：常规

编码	长度/mm
K301100003-022	6
K301100003-010	7
K301100003-003	8.5
K301100003-004	10
K301100003-008	11.5
K301100003-013	13
K301100003-023	15

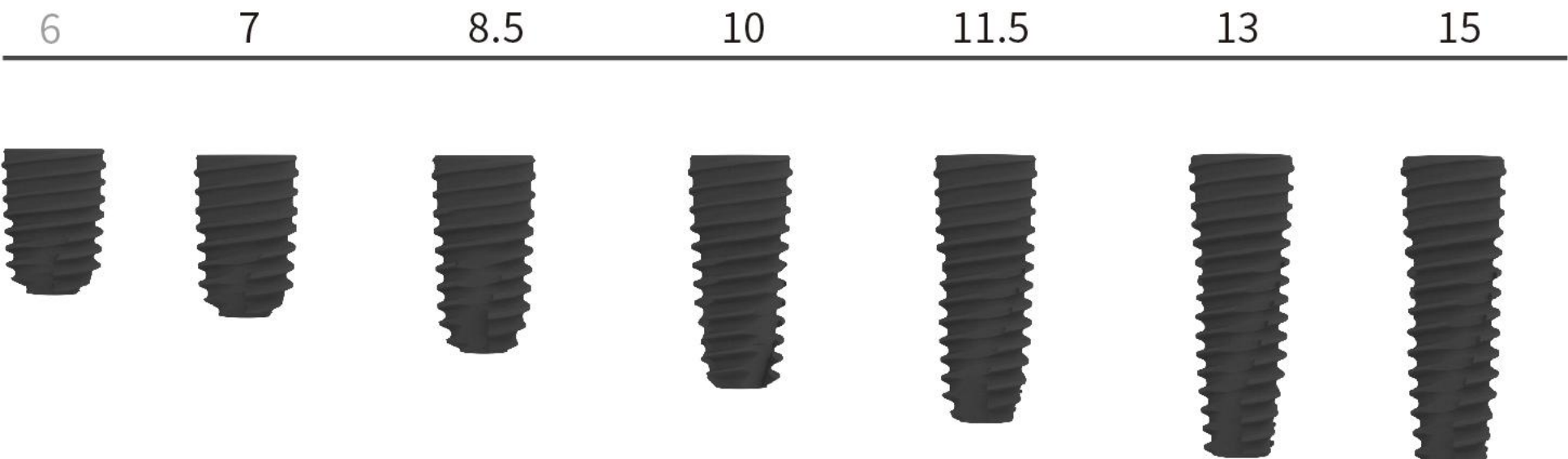


直径：5.0mm 平台：常规

编码	长度/mm
K301100003-024	6
K301100003-011	7
K301100003-005	8.5
K301100003-006	10
K301100003-009	11.5
K301100003-014	13
K301100003-025	15

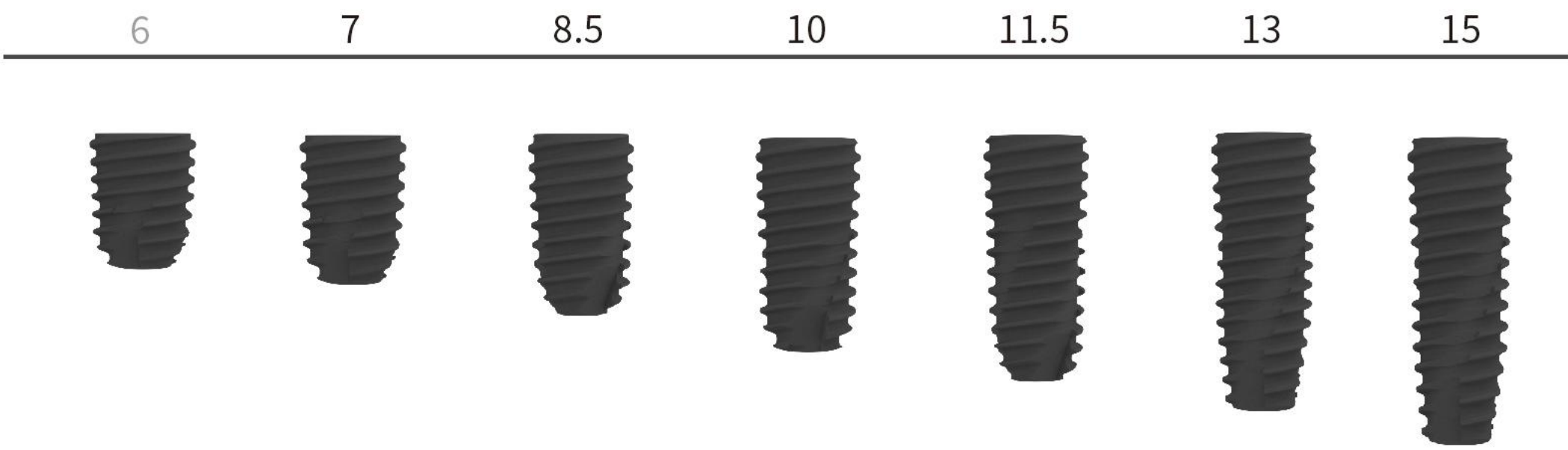


直径：6.0mm 平台：常规

编码	长度/mm
K301100003-026	6
K301100003-016	7
K301100003-017	8.5
K301100003-018	10
K301100003-019	11.5
K301100003-027	13

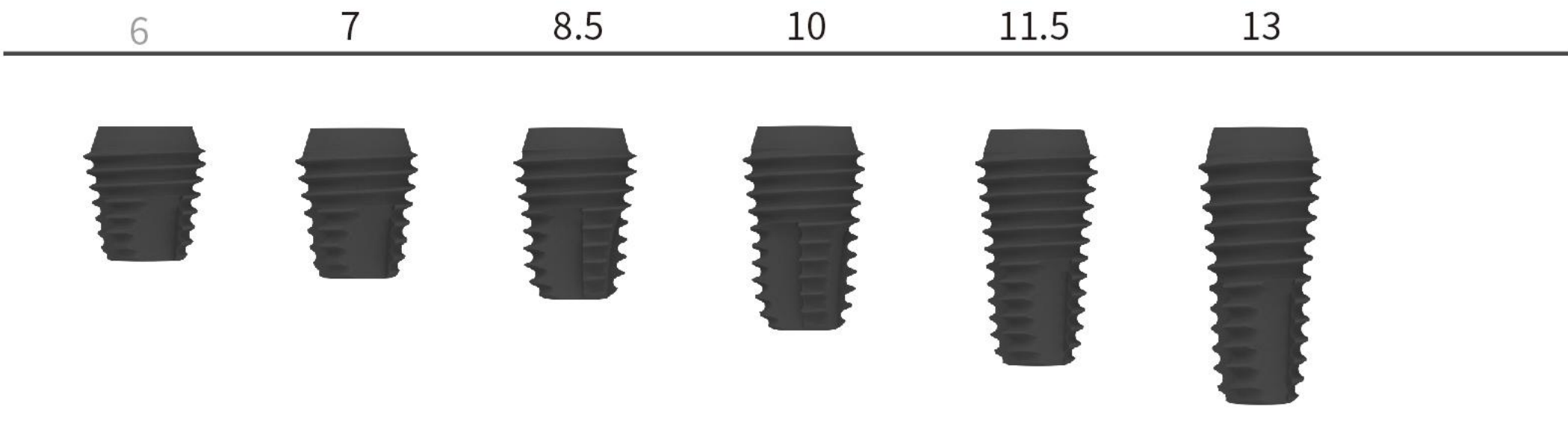

直径：7.0mm 平台：常规

编码	长度/mm
K301100003-028	6
K301100003-029	7
K301100003-030	8.5
K301100003-031	10
K301100003-032	11.5
K301100003-033	13

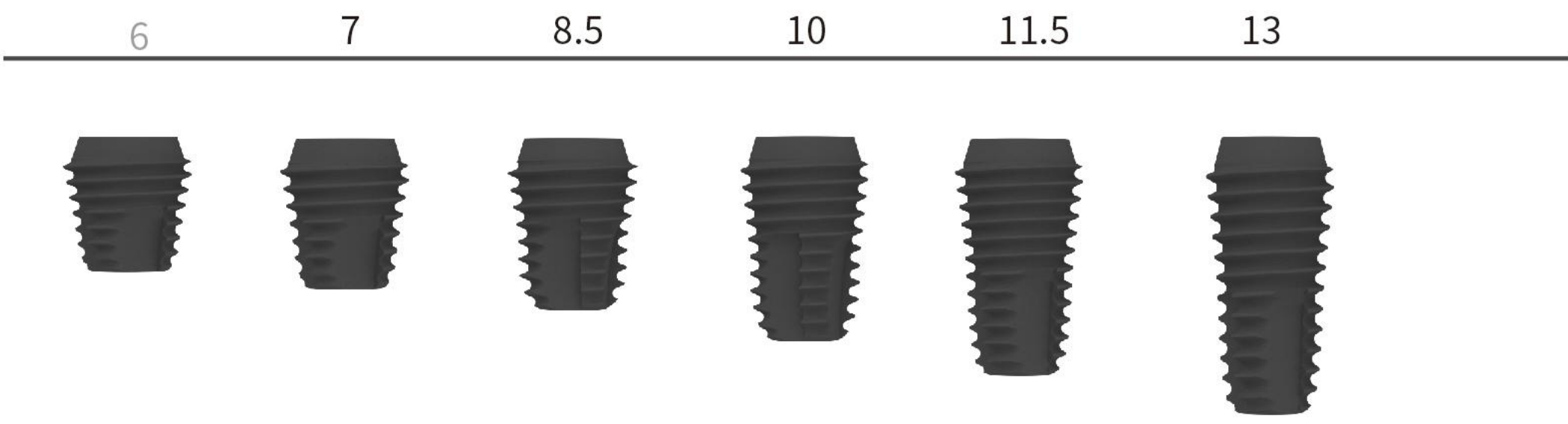

覆盖螺丝




编码	产品描述	平台	高度 H(mm)
K301702002-001	覆盖螺丝M-H0.4	迷你	0.4
K301702002-002	覆盖螺丝M-H2.0	迷你	2.0
K301702003-001	覆盖螺丝R-H0.4	常规	0.4
K301702003-002	覆盖螺丝R-H2.0	常规	2.0


- 包装单位：1*覆盖螺丝
- 材料：医用钛合金
- 植入植体后,用于封闭植体内腔
- 根据接口和高度选择
- 使用Hex1.2六角螺丝刀拧紧
- 建议拧紧扭矩：8~10 N.cm

修复配件

修复程序 I（标准种植修复）

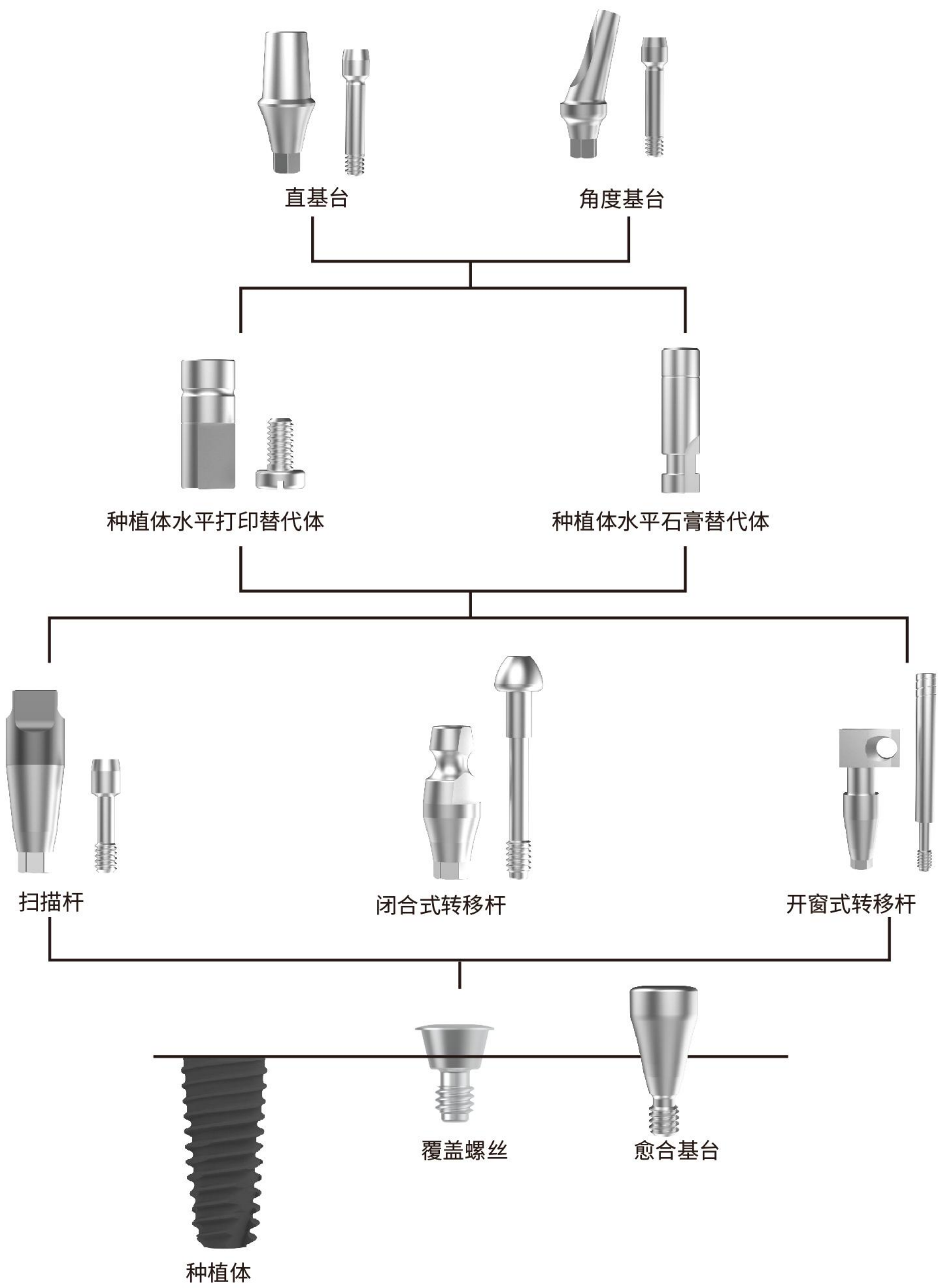


愈合基台

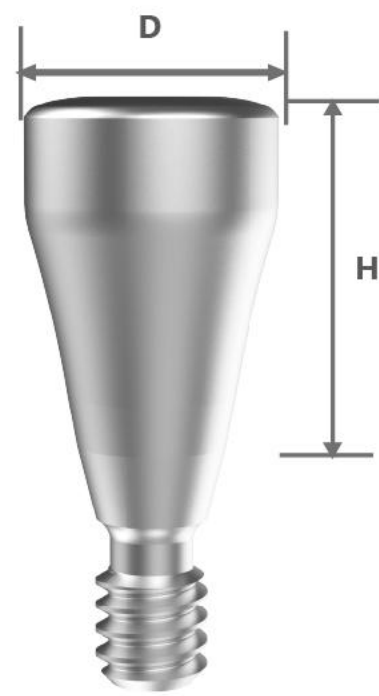

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 H(mm)
K301201002-004	愈合基台-标准型M-Φ4.0-H3.0	4.0	3.0
K301201002-005	愈合基台-标准型M-Φ4.0-H4.0	4.0	4.0
K301201002-006	愈合基台-标准型M-Φ4.0-H5.0	4.0	5.0
K301201002-007	愈合基台-标准型M-Φ4.0-H7.0	4.0	7.0
K301201002-001	愈合基台-标准型M-Φ4.5-H3.0	4.5	3.0
K301201002-008	愈合基台-标准型M-Φ4.5-H4.0	4.5	4.0
K301201002-002	愈合基台-标准型M-Φ4.5-H5.0	4.5	5.0
K301201002-003	愈合基台-标准型M-Φ4.5-H7.0	4.5	7.0
K301201003-010	愈合基台-标准型R-Φ4.0-H3.0	4.0	3.0
K301201003-011	愈合基台-标准型R-Φ4.0-H4.0	4.0	4.0
K301201003-012	愈合基台-标准型R-Φ4.0-H5.0	4.0	5.0
K301201003-013	愈合基台-标准型R-Φ4.0-H7.0	4.0	7.0
K301201003-029	愈合基台-标准型R-Φ4.0-H9.0	4.0	9.0
K301201003-001	愈合基台-标准型R-Φ4.5-H3.0	4.5	3.0
K301201003-009	愈合基台-标准型R-Φ4.5-H4.0	4.5	4.0
K301201003-002	愈合基台-标准型R-Φ4.5-H5.0	4.5	5.0
K301201003-003	愈合基台-标准型R-Φ4.5-H7.0	4.5	7.0
K301201003-030	愈合基台-标准型R-Φ4.5-H9.0	4.5	9.0
K301201003-014	愈合基台-标准型R-Φ5.0-H3.0	5.0	3.0
K301201003-015	愈合基台-标准型R-Φ5.0-H4.0	5.0	4.0
K301201003-016	愈合基台-标准型R-Φ5.0-H5.0	5.0	5.0
K301201003-017	愈合基台-标准型R-Φ5.0-H7.0	5.0	7.0
K301201003-031	愈合基台-标准型R-Φ5.0-H9.0	5.0	9.0
K301201003-004	愈合基台-标准型R-Φ5.5-H3.0	5.5	3.0
K301201003-005	愈合基台-标准型R-Φ5.5-H5.0	5.5	5.0
K301201003-006	愈合基台-标准型R-Φ5.5-H7.0	5.5	7.0
K301201003-018	愈合基台-标准型R-Φ6.0-H3.0	6.0	3.0
K301201003-019	愈合基台-标准型R-Φ6.0-H4.0	6.0	4.0
K301201003-020	愈合基台-标准型R-Φ6.0-H5.0	6.0	5.0
K301201003-021	愈合基台-标准型R-Φ6.0-H7.0	6.0	7.0
K301201003-032	愈合基台-标准型R-Φ6.0-H9.0	6.0	9.0
K301201003-007	愈合基台-标准型R-Φ6.5-H3.0	6.5	3.0
K301201003-008	愈合基台-标准型R-Φ6.5-H5.0	6.5	5.0
K301201003-022	愈合基台-标准型R-Φ7.0-H3.0	7.0	3.0
K301201003-023	愈合基台-标准型R-Φ7.0-H4.0	7.0	4.0
K301201003-024	愈合基台-标准型R-Φ7.0-H5.0	7.0	5.0
K301201003-025	愈合基台-标准型R-Φ7.0-H7.0	7.0	7.0
K301201003-033	愈合基台-标准型R-Φ7.0-H9.0	7.0	9.0

- 包装单位：1*愈合基台
- 材料：医用钛合金
- 在软组织愈合时，形成穿龈轮廓
- 根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.2六角螺丝刀拧紧
- 建议拧紧扭矩：8~10 N.cm


直基台

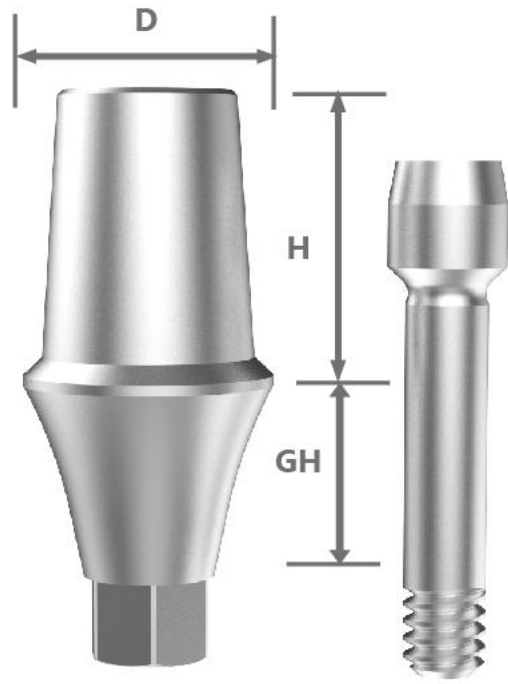

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301202002-001	直基台M-Φ4.5-GH1.0-H5.5-抗旋	4.5	1.0	5.5
K301202002-002	直基台M-Φ4.5-GH2.0-H5.5-抗旋	4.5	2.0	5.5
K301202002-003	直基台M-Φ4.5-GH3.0-H5.5-抗旋	4.5	3.0	5.5
K301202002-004	直基台M-Φ4.5-GH4.0-H5.5-抗旋	4.5	4.0	5.5
K301202002-005	直基台M-Φ4.5-GH5.0-H5.5-抗旋	4.5	5.0	5.5
K301202002-033	直基台M-Φ4.5-GH1.0-H5.5-非抗	4.5	1.0	5.5
K301202002-034	直基台M-Φ4.5-GH2.0-H5.5-非抗	4.5	2.0	5.5
K301202002-035	直基台M-Φ4.5-GH3.0-H5.5-非抗	4.5	3.0	5.5
K301202002-036	直基台M-Φ4.5-GH4.0-H5.5-非抗	4.5	4.0	5.5
K301202002-037	直基台M-Φ4.5-GH5.0-H5.5-非抗	4.5	5.0	5.5
K301202003-001	直基台R-Φ4.5-GH1.0-H5.5-抗旋	4.5	1.0	5.5
K301202003-002	直基台R-Φ4.5-GH2.0-H5.5-抗旋	4.5	2.0	5.5
K301202003-003	直基台R-Φ4.5-GH3.0-H5.5-抗旋	4.5	3.0	5.5
K301202003-004	直基台R-Φ4.5-GH4.0-H5.5-抗旋	4.5	4.0	5.5
K301202003-005	直基台R-Φ4.5-GH5.0-H5.5-抗旋	4.5	5.0	5.5
K301202003-032	直基台R-Φ4.5-GH1.0-H5.5-非抗	4.5	1.0	5.5
K301202003-033	直基台R-Φ4.5-GH2.0-H5.5-非抗	4.5	2.0	5.5
K301202003-034	直基台R-Φ4.5-GH3.0-H5.5-非抗	4.5	3.0	5.5
K301202003-035	直基台R-Φ4.5-GH4.0-H5.5-非抗	4.5	4.0	5.5
K301202003-024	直基台R-Φ4.5-GH5.0-H5.5-非抗	4.5	5.0	5.5
K301202003-006	直基台R-Φ5.0-GH1.0-H5.5-抗旋	5.0	1.0	5.5
K301202003-007	直基台R-Φ5.0-GH2.0-H5.5-抗旋	5.0	2.0	5.5
K301202003-008	直基台R-Φ5.0-GH3.0-H5.5-抗旋	5.0	3.0	5.5
K301202003-009	直基台R-Φ5.0-GH4.0-H5.5-抗旋	5.0	4.0	5.5
K301202003-010	直基台R-Φ5.0-GH5.0-H5.5-抗旋	5.0	5.0	5.5
K301202003-041	直基台R-Φ5.0-GH1.0-H5.5-非抗	5.0	1.0	5.5
K301202003-042	直基台R-Φ5.0-GH2.0-H5.5-非抗	5.0	2.0	5.5
K301202003-043	直基台R-Φ5.0-GH3.0-H5.5-非抗	5.0	3.0	5.5
K301202003-044	直基台R-Φ5.0-GH4.0-H5.5-非抗	5.0	4.0	5.5
K301202003-045	直基台R-Φ5.0-GH5.0-H5.5-非抗	5.0	5.0	5.5
K301202003-011	直基台R-Φ6.0-GH2.0-H5.5-抗旋	6.0	2.0	5.5
K301202003-012	直基台R-Φ6.0-GH3.0-H5.5-抗旋	6.0	3.0	5.5
K301202003-013	直基台R-Φ6.0-GH4.0-H5.5-抗旋	6.0	4.0	5.5
K301202003-025	直基台R-Φ6.0-GH5.0-H5.5-抗旋	6.0	5.0	5.5
K301202003-014	直基台R-Φ5.0-GH1.0-H7.0-抗旋	5.0	1.0	7.0
K301202003-015	直基台R-Φ5.0-GH2.0-H7.0-抗旋	5.0	2.0	7.0
K301202003-016	直基台R-Φ5.0-GH3.0-H7.0-抗旋	5.0	3.0	7.0
K301202003-017	直基台R-Φ5.0-GH4.0-H7.0-抗旋	5.0	4.0	7.0
K301202003-018	直基台R-Φ5.0-GH5.0-H7.0-抗旋	5.0	5.0	7.0
K301202003-019	直基台R-Φ6.0-GH2.0-H7.0-抗旋	6.0	2.0	7.0
K301202003-020	直基台R-Φ6.0-GH3.0-H7.0-抗旋	6.0	3.0	7.0
K301202003-021	直基台R-Φ6.0-GH4.0-H7.0-抗旋	6.0	4.0	7.0
K301202003-026	直基台R-Φ6.0-GH5.0-H7.0-抗旋	6.0	5.0	7.0
K301202003-056	直基台R-Φ6.0-GH1.0-H5.5-抗旋	6.0	1.0	5.5
K301202003-063	直基台R-Φ6.0-GH1.0-H5.5-非抗	6.0	1.0	5.5
K301202003-064	直基台R-Φ6.0-GH2.0-H5.5-非抗	6.0	2.0	5.5
K301202003-065	直基台R-Φ6.0-GH3.0-H5.5-非抗	6.0	3.0	5.5
K301202003-066	直基台R-Φ6.0-GH4.0-H5.5-非抗	6.0	4.0	5.5
K301202003-067	直基台R-Φ6.0-GH5.0-H5.5-非抗	6.0	5.0	5.5
K301202003-073	直基台R-Φ7.0-GH1.0-H5.5-抗旋	7.0	1.0	5.5
K301202003-074	直基台R-Φ7.0-GH2.0-H5.5-抗旋	7.0	2.0	5.5
K301202003-075	直基台R-Φ7.0-GH3.0-H5.5-抗旋	7.0	3.0	5.5
K301202003-076	直基台R-Φ7.0-GH4.0-H5.5-抗旋	7.0	4.0	5.5
K301202003-077	直基台R-Φ7.0-GH5.0-H5.5-抗旋	7.0	5.0	5.5

• 其他型号见下页

角度基台

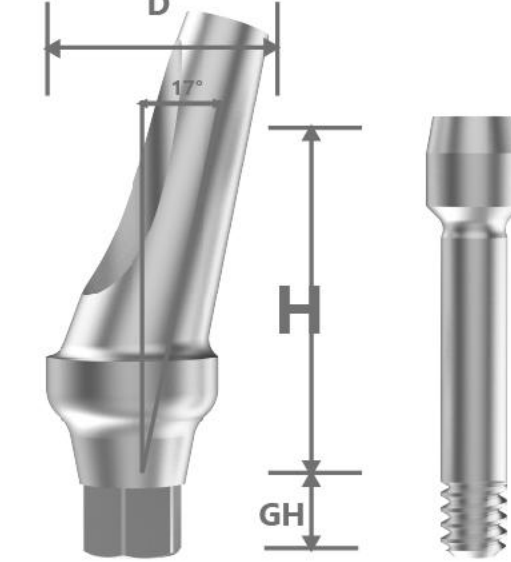


编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301202003-078	直基台R-Φ7.0-GH1.0-H5.5-非抗	7.0	1.0	5.5
K301202003-079	直基台R-Φ7.0-GH2.0-H5.5-非抗	7.0	2.0	5.5
K301202003-080	直基台R-Φ7.0-GH3.0-H5.5-非抗	7.0	3.0	5.5
K301202003-081	直基台R-Φ7.0-GH4.0-H5.5-非抗	7.0	4.0	5.5
K301202003-082	直基台R-Φ7.0-GH5.0-H5.5-非抗	7.0	5.0	5.5

- 包装单位：1*直基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用，根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.2六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例

编码	产品描述	角度 A(°)	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301203002-005	角度基台M-Φ4.0-GH2.0-17度-抗旋-A	17	4.0	2.0	8.0
K301203002-007	角度基台M-Φ4.0-GH4.0-17度-抗旋-A	17	4.0	4.0	8.0
K301203002-006	角度基台M-Φ4.0-GH2.0-17度-抗旋-B	17	4.0	2.0	8.0
K301203002-008	角度基台M-Φ4.0-GH4.0-17度-抗旋-B	17	4.0	4.0	8.0
K301203002-001	角度基台M-Φ4.5-GH2.0-17度-抗旋-A	17	4.5	2.0	8.0
K301203002-002	角度基台M-Φ4.5-GH4.0-17度-抗旋-A	17	4.5	4.0	8.0
K301203002-003	角度基台M-Φ4.5-GH2.0-17度-抗旋-B	17	4.5	2.0	8.0
K301203002-004	角度基台M-Φ4.5-GH4.0-17度-抗旋-B	17	4.5	4.0	8.0
K301203003-009	角度基台R-Φ4.5-GH2.0-17度-抗旋-A	17	4.5	2.0	8.0
K301203003-011	角度基台R-Φ4.5-GH4.0-17度-抗旋-A	17	4.5	4.0	8.0
K301203003-010	角度基台R-Φ4.5-GH2.0-17度-抗旋-B	17	4.5	2.0	8.0
K301203003-012	角度基台R-Φ4.5-GH4.0-17度-抗旋-B	17	4.5	4.0	8.0
K301203003-001	角度基台R-Φ5.0-GH2.0-17度-抗旋-A	17	5.0	2.0	8.0
K301203003-002	角度基台R-Φ5.0-GH4.0-17度-抗旋-A	17	5.0	4.0	8.0
K301203003-005	角度基台R-Φ5.0-GH2.0-17度-抗旋-B	17	5.0	2.0	8.0
K301203003-006	角度基台R-Φ5.0-GH4.0-17度-抗旋-B	17	5.0	4.0	8.0
K301203003-003	角度基台R-Φ6.0-GH2.0-17度-抗旋-A	17	6.0	2.0	8.0
K301203003-004	角度基台R-Φ6.0-GH4.0-17度-抗旋-A	17	6.0	4.0	8.0

- 包装单位：1*角度基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 抗旋接口，六个可调整方向
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用
- 根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.2六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


基底基台

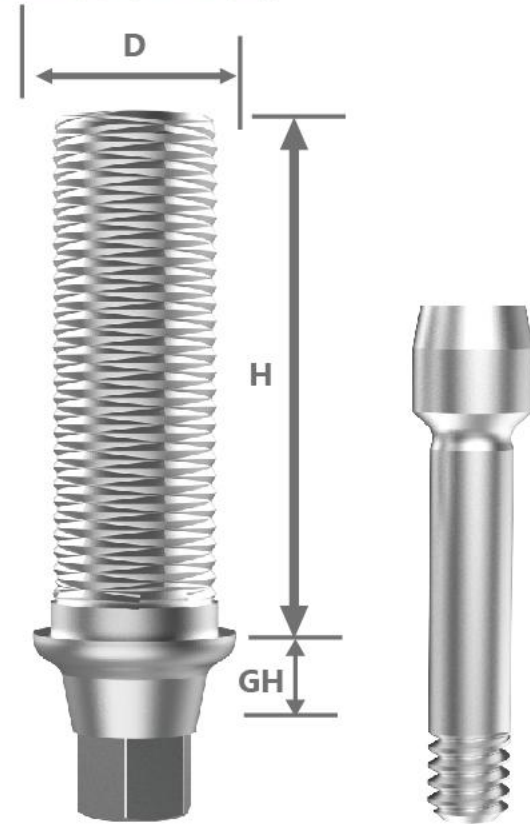

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301202002-006	基底基台M-Φ4.0-GH1.0-抗旋	4.0	1.0	10.0
K301202002-007	基底基台M-Φ4.0-GH1.0-非抗旋	4.0	1.0	10.0
K301202003-022	基底基台R-Φ4.5-GH1.0-抗旋	4.5	1.0	10.0
K301202003-023	基底基台R-Φ4.5-GH1.0-非抗	4.5	1.0	10.0

- 包装单位：1*直基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用，根据直径和穿龈高度选择
- 使用Hex1.2六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


种植体水平闭合式转移杆

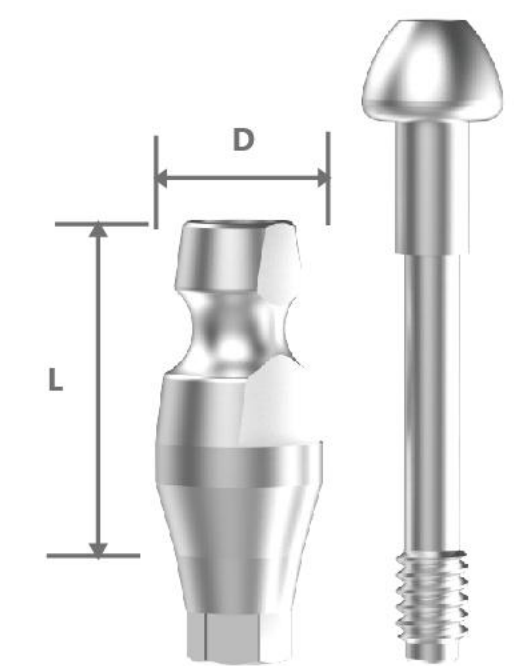

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301302002-001	种植体水平闭合式转移杆M-Φ4.0-L11-抗旋	4.0	11.0
K301302002-002	种植体水平闭合式转移杆M-Φ4.0-L14-抗旋	4.0	14.0
K301302002-003	种植体水平闭合式转移杆M-Φ4.5-L11-抗旋	4.5	11.0
K301302002-004	种植体水平闭合式转移杆M-Φ4.5-L14-抗旋	4.5	14.0
K301302003-003	种植体水平闭合式转移杆R-Φ5.0-L11-抗旋	4.0	11.0
K301302003-001	种植体水平闭合式转移杆R-Φ4.5-L11-抗旋	4.5	11.0
K301302003-002	种植体水平闭合式转移杆R-Φ4.5-L14-抗旋	4.5	14.0
K301302003-007	种植体水平闭合式转移杆R-Φ4.0-L14-抗旋	5.0	14.0
K301302003-004	种植体水平闭合式转移杆R-Φ5.0-L14-抗旋	5.0	14.0
K301302003-005	种植体水平闭合式转移杆R-Φ6.0-L11-抗旋	6.0	11.0
K301302003-006	种植体水平闭合式转移杆R-Φ6.0-L14-抗旋	6.0	14.0

- 包装单位: 1 *闭合式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料：医用钛合金
- 抗旋，植体水平闭合式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用Hex1.2六角螺丝刀，手动拧紧即可


种植体水平开窗式转移杆

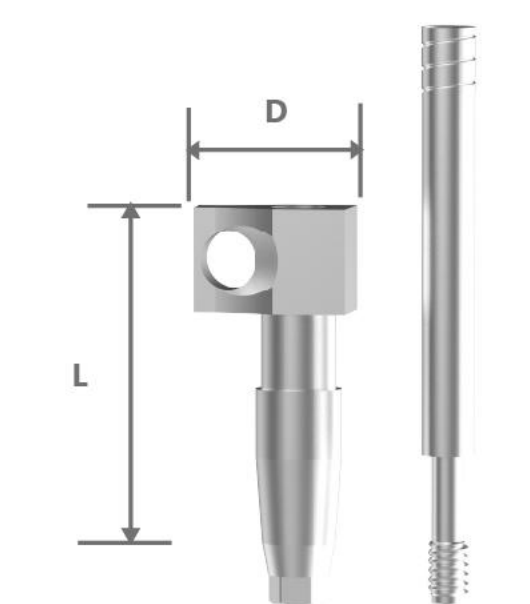

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301301002-001	种植体水平开窗式转移杆M-Φ4.0-L11-抗旋	4.0	11.0
K301301002-002	种植体水平开窗式转移杆M-Φ4.0-L15-抗旋	4.0	15.0
K301301002-004	种植体水平开窗式转移杆M-Φ4.5-L11-抗旋	4.5	11.0
K301301002-006	种植体水平开窗式转移杆M-Φ4.5-L15-抗旋	4.5	15.0
K301301003-005	种植体水平开窗式转移杆R-Φ4.0-L11-抗旋	4.0	11.0
K301301003-007	种植体水平开窗式转移杆R-Φ4.0-L15-抗旋	4.0	15.0
K301301003-001	种植体水平开窗式转移杆R-Φ4.5-L11-抗旋	4.5	11.0
K301301003-002	种植体水平开窗式转移杆R-Φ4.5-L15-抗旋	4.5	15.0
K301301003-003	种植体水平开窗式转移杆R-Φ5.0-L11-抗旋	5.0	11.0
K301301003-004	种植体水平开窗式转移杆R-Φ5.0-L15-抗旋	5.0	15.0
K301301003-009	种植体水平开窗式转移杆R-Φ6.0-L11-抗旋	6.0	11.0
K301301003-011	种植体水平开窗式转移杆R-Φ6.0-L15-抗旋	6.0	15.0

- 包装单位: 1 *开窗式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料：医用钛合金
- 抗旋，植体水平开窗式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用Hex1.2六角螺丝刀，手动拧紧即可


植体水平石膏替代体

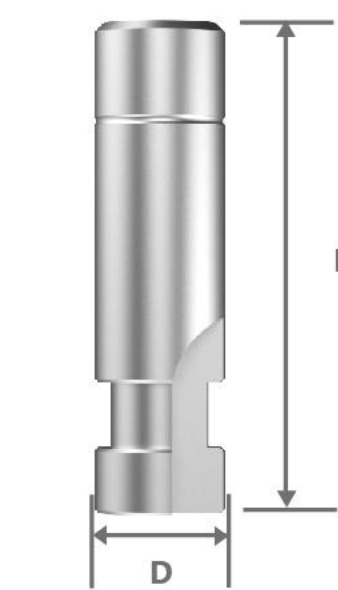

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301601002-001	种植体水平石膏替代体M	3.5	15.0
K301601003-001	种植体水平石膏替代体R	4.0	15.0

- 包装单位: 1 *替代体
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 传统石膏倒模用，将口内的种植体重现在石膏技工模型上
- 植体水平取模通用款


植体水平打印替代体

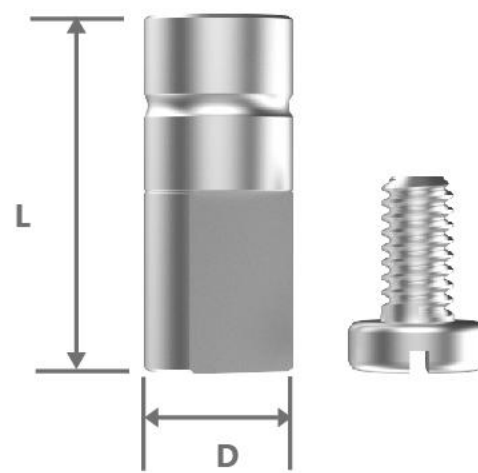

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301602002-001	种植体水平打印替代体M	3.5	9.5
K301602003-001	种植体水平打印替代体R	4.0	9.5

- 包装单位: 1 *替代体，1*替代体底部螺丝
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 口扫打印模型用，将口内的种植体重现在树脂技工模型上
- 植体水平取模、口扫通用款

种植体水平扫描杆

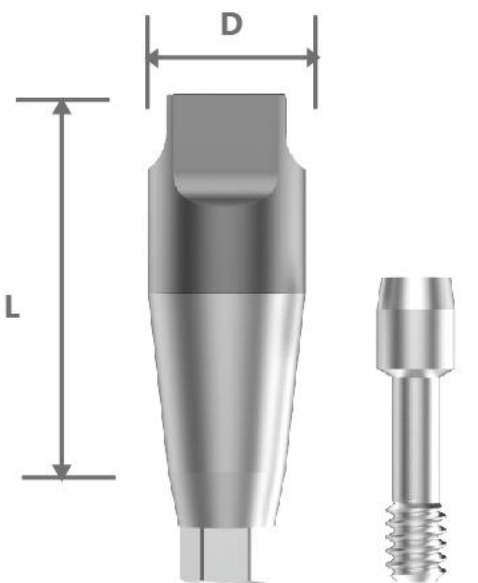


编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301404002-001	种植体水平扫描杆M-D4-L10	4.0	10.0
K301404002-002	种植体水平扫描杆M-D4-L15	4.0	15.0
K301404003-003	种植体水平扫描杆R-D4.5-L10	4.5	10.0
K301404003-004	种植体水平扫描杆R-D4.5-L15	4.5	15.0


- 包装单位: 1 *植体水平扫描杆，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 抗旋，植体水平口扫用
- 搭配中央螺丝使用
- 口扫时，扫描模式选择种植模式
- 使用口扫，需配套使用数字化替代体
- 使用Hex1.2六角螺丝刀，手动拧紧即可

修复配件

修复程序 II（桥架类修复）

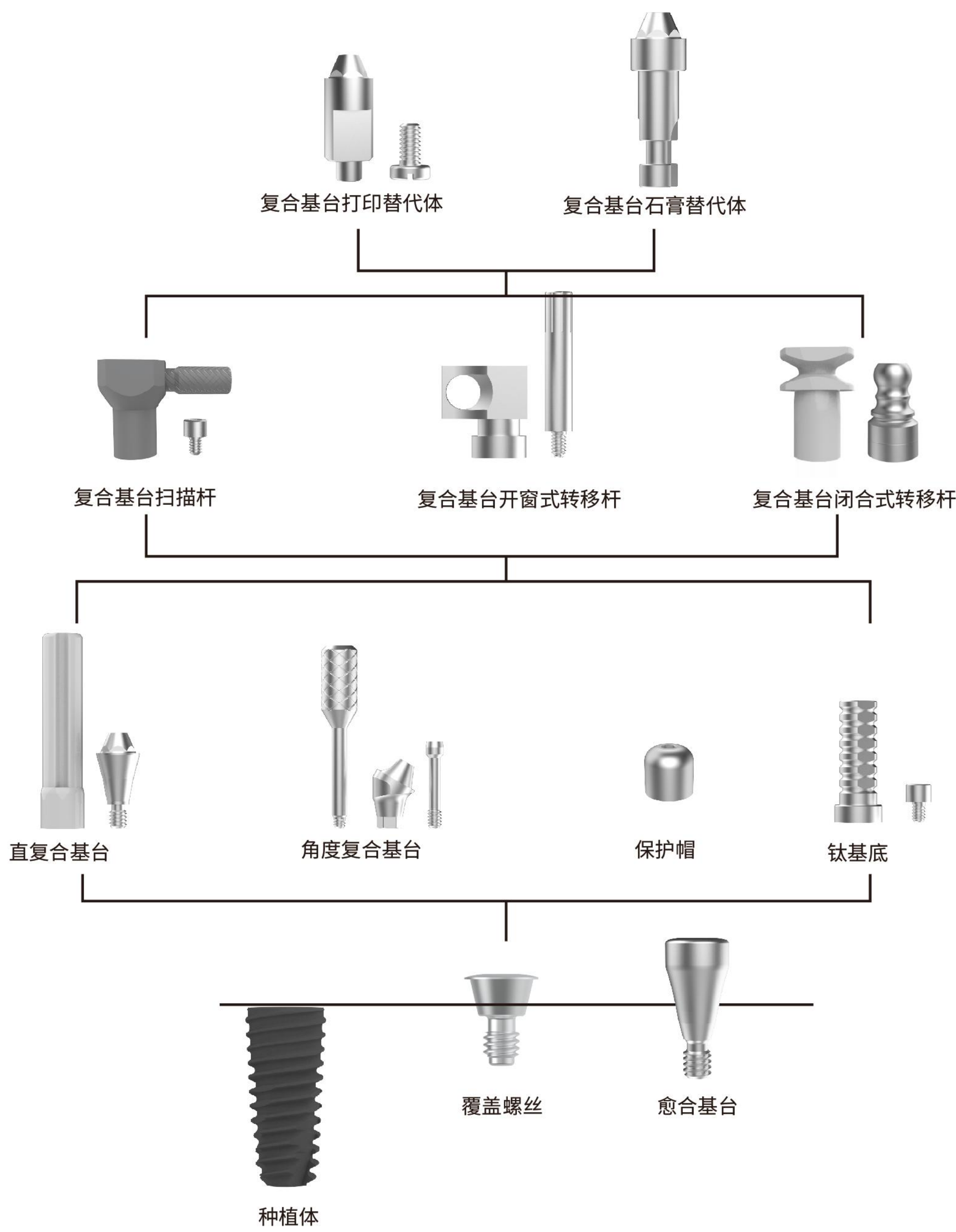


直复合基台

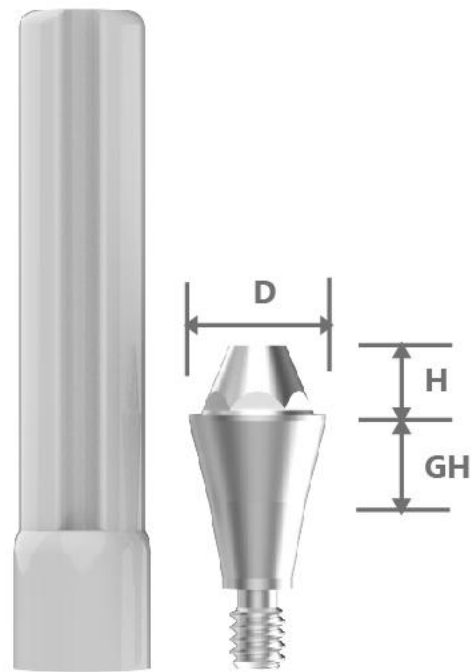

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301204002-001	直复合基台M-Φ4.8-GH1.0	4.8	1.0	2.25
K301204002-002	直复合基台M-Φ4.8-GH2.0	4.8	2.0	2.25
K301204002-003	直复合基台M-Φ4.8-GH3.0	4.8	3.0	2.25
K301204002-004	直复合基台M-Φ4.8-GH4.0	4.8	4.0	2.25
K301204002-005	直复合基台M-Φ4.8-GH5.0	4.8	5.0	2.25
K301204002-011	直复合基台M-Φ4.8-GH6.0	4.8	6.0	2.25
K301204003-001	直复合基台R-Φ4.8-GH1.0	4.8	1.0	2.25
K301204003-002	直复合基台R-Φ4.8-GH2.0	4.8	2.0	2.25
K301204003-003	直复合基台R-Φ4.8-GH3.0	4.8	3.0	2.25
K301204003-004	直复合基台R-Φ4.8-GH4.0	4.8	4.0	2.25
K301204003-005	直复合基台R-Φ4.8-GH5.0	4.8	5.0	2.25
K301204003-008	直复合基台R-Φ4.8-GH6.0	4.8	6.0	2.25
K301204003-009	直复合基台R-Φ4.8-GH7.0	4.8	7.0	2.25
K301204003-010	直复合基台R-Φ4.8-GH8.0	4.8	8.0	2.25

- 包装单位：1*直复合基台，1*辅助手柄
- 材料：医用钛合金
- 螺丝与基台一体型
- 矫正就位道，桥架修复用
- 如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用套筒扳手，与扭力扳手或者手机配合拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 基台水平取模


角度复合基台

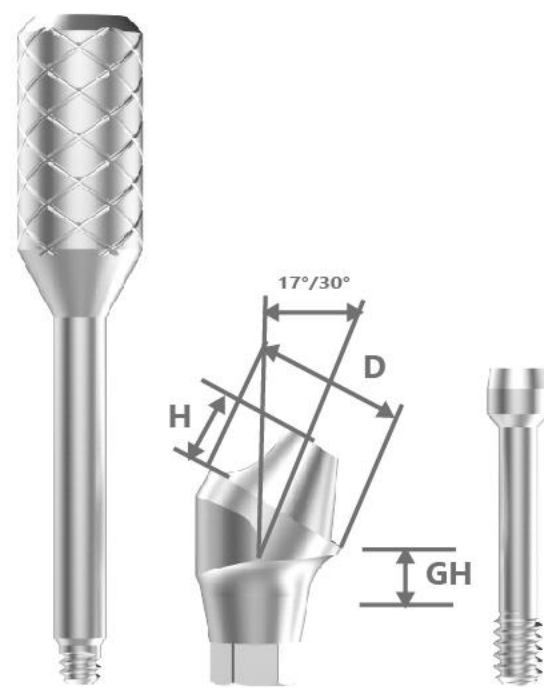

编码	产品描述	角度 A(°)	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301205002-001	角度复合基台M-Φ4.8-GH2.0-17度-抗旋	17	4.8	2.0	2.25
K301205002-002	角度复合基台M-Φ4.8-GH3.0-17度-抗旋	17	4.8	3.0	2.25
K301205002-003	角度复合基台M-Φ4.8-GH4.0-17度-抗旋	17	4.8	4.0	2.25
K301205002-004	角度复合基台M-Φ4.8-GH3.0-30度-抗旋	17	4.8	3.0	2.25
K301205002-005	角度复合基台M-Φ4.8-GH4.0-30度-抗旋	17	4.8	4.0	2.25
K301205002-006	角度复合基台M-Φ4.8-GH5.0-30度-抗旋	17	4.8	5.0	2.25
K301205003-001	角度复合基台R-Φ4.8-GH2.0-17度-抗旋	17	4.8	2.0	2.25
K301205003-002	角度复合基台R-Φ4.8-GH3.0-17度-抗旋	17	4.8	3.0	2.25
K301205003-003	角度复合基台R-Φ4.8-GH4.0-17度-抗旋	17	4.8	4.0	2.25
K301205003-004	角度复合基台R-Φ4.8-GH5.0-17度-抗旋	17	4.8	5.0	2.25
K301205003-011	角度复合基台R-Φ4.8-GH6.0-17度-抗旋	17	4.8	6.0	2.25
K301205003-012	角度复合基台R-Φ4.8-GH7.0-17度-抗旋	17	4.8	7.0	2.25
K301205003-005	角度复合基台R-Φ4.8-GH2.0-30度-抗旋	30	4.8	2.0	2.25
K301205003-006	角度复合基台R-Φ4.8-GH3.0-30度-抗旋	30	4.8	3.0	2.25
K301205003-007	角度复合基台R-Φ4.8-GH4.0-30度-抗旋	30	4.8	4.0	2.25
K301205003-008	角度复合基台R-Φ4.8-GH5.0-30度-抗旋	30	4.8	5.0	2.25
K301205003-013	角度复合基台R-Φ4.8-GH6.0-30度-抗旋	30	4.8	6.0	2.25
K301205003-014	角度复合基台R-Φ4.8-GH7.0-30度-抗旋	30	4.8	7.0	2.25
K301205003-015	角度复合基台R-Φ4.8-GH4.5-45度-抗旋	45	4.8	4.5	2.25

- 包装单位：1*角度复合基台，1*辅助手柄
- 材料：医用钛合金
- 螺丝与基台分体型，分17°和30°
- 矫正就位道，桥架修复用
- 如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用Hex1.2六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm


复合基台保护帽

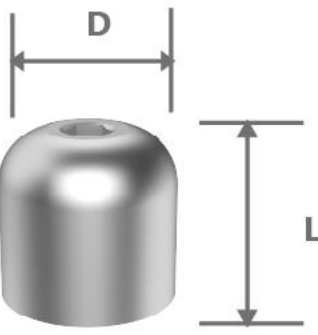

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301501003-001	复合基台保护帽R/M通用-φ4.8-非抗	4.8	4.6

- 包装单位：1*保护帽
- 材料：医用钛合金
- 暂时封堵复合基台二级接口螺丝孔，或复合基台水平牙龈成型
- 一体式，使用Hex1.2六角螺丝刀手动拧紧


复合基台钛基底

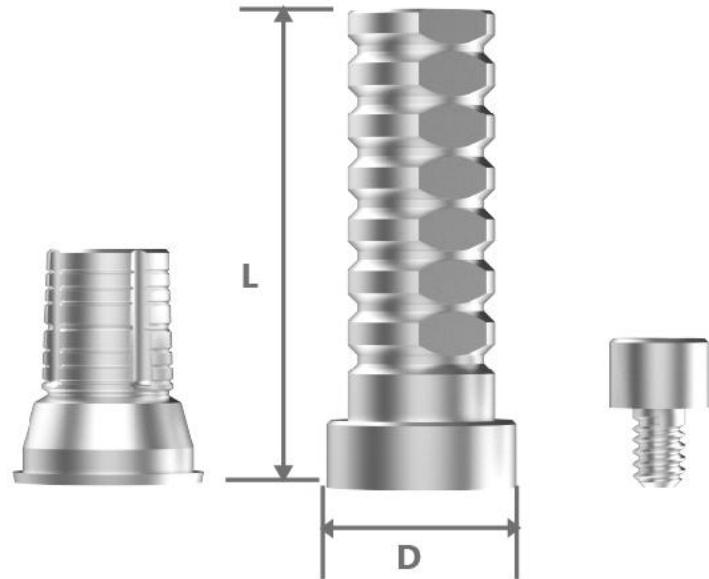

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301502003-002	复合基台石膏钛基底R/M通用-φ4.8-非抗	4.8	12.0
K301502003-006	复合基台数字化钛基底R/M通用-φ4.8-L6-非抗	4.8	6.0

- 包装单位：1*临时基台，1*桥用螺丝
- 材料：医用钛合金
- 非抗接口，临时修复用
- 与桥用螺丝配套使用
- 分别对应2/4/6/8四个高度
- 分石膏和数字化两款，如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用Hex1.2六角螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：20 N.cm
- 适用于复合基台水平取模案例


复合基台开窗式转移杆

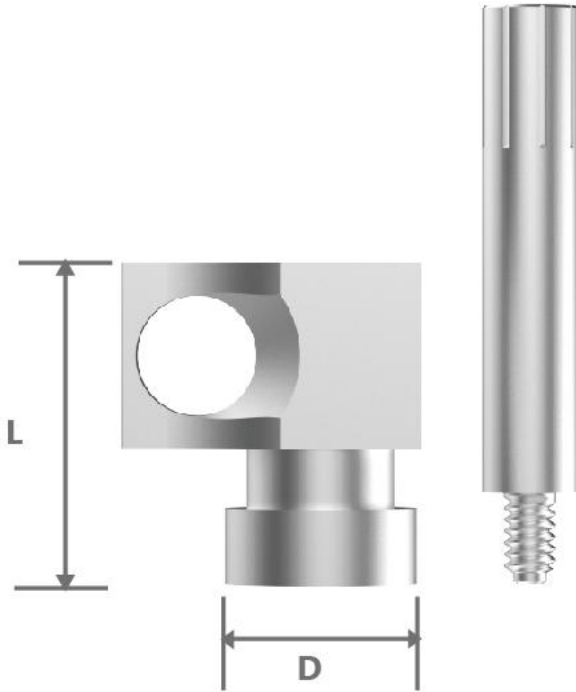

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301303003-001	复合基台开窗式转移杆R/M通用-D48-F	4.8	8.0

- 包装单位: 1 *开窗式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料：医用钛合金
- 非抗，复合基台水平开窗式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用Hex1.2六角螺丝刀，手动拧紧即可


复合基台闭合式转移杆

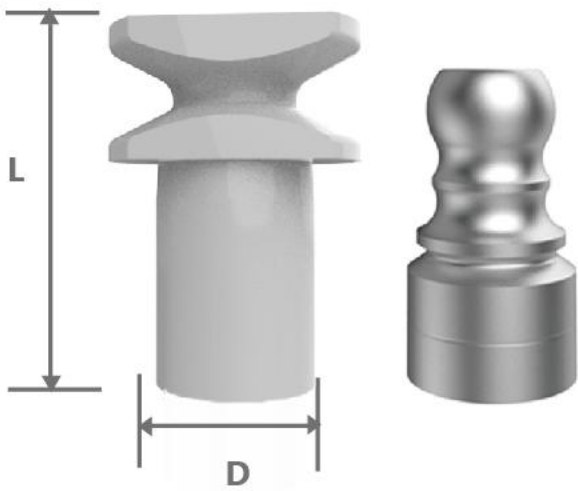

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301501003-002	复合基台保护帽R/M通用-φ4.8-L8	4.8	8.0
K301501001-012	复合基台闭合转移杆-配套印模帽	4.8	11.0

- 包装单位：1*闭口式金属转移帽、1*塑料印模帽(单独采购)
- 材料：医用钛合金、医用塑料
- 非抗，复合基台水平闭口式取模用
- 两个搭配使用，用于即刻负重临时牙取模，不建议用于永久性修复取模


复合基台石膏替代体

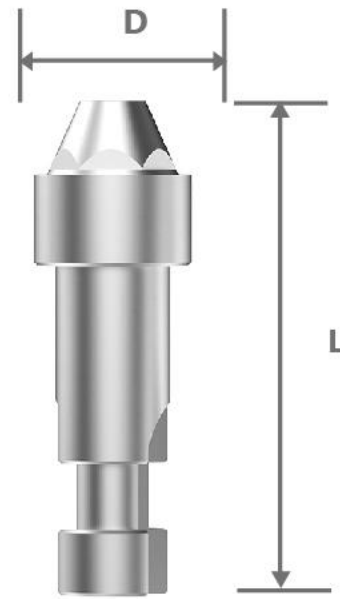

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301603003-001	复合基台石膏替代体R/M通用-Φ4.8	4.8	15.0

- 包装单位: 1 *替代体
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 传统石膏倒模用，将口内的复合基台的位置重现在石膏技工模型上
- 复合基台水平取模通用款


复合基台打印替代体

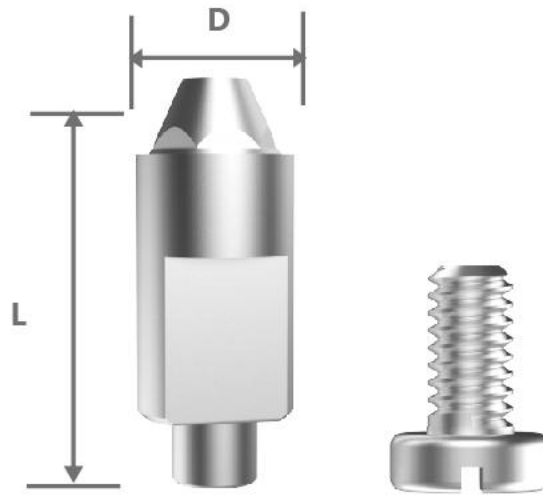

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301604003-001	复合基台打印替代体R/M通用-Φ4.8	4.8	12.25

- 包装单位: 1 *替代体，1*替代体底部螺丝
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 口扫打印模型用，将口内的种植体重现在树脂技工模型上
- 复合基台水平取模、口扫通用款

复合基台扫描杆

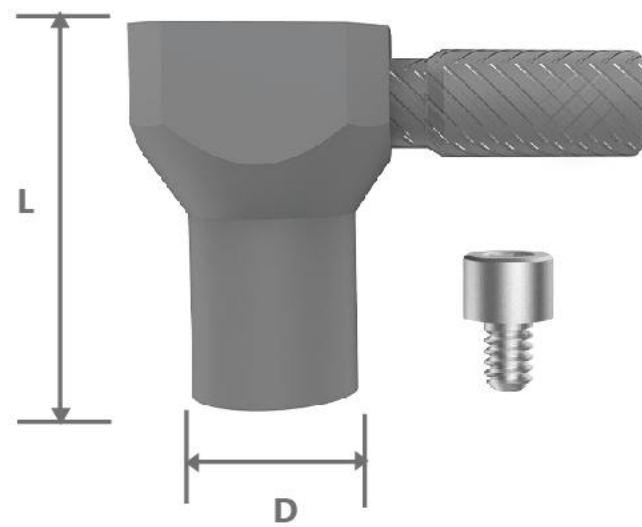

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301403003-002	复合基台扫描杆 普瑞邦4.0	4.0	10.0
K301403003-001	复合基台扫描杆 普瑞邦4.8	4.8	10.0

- 包装单位: 1 *扫描杆，1*桥用螺丝，1*识别杆
- 材料：医用钛合金
- 非抗，复合基台水平口扫用
- 搭配桥用螺丝使用
- 种植位相隔较近时，无需安装识别杆，相隔较远，需安装识别杆
- 使用口扫，需配套使用复合基台打印替代体